



PHALLO♂SAN®

DE	Gebrauchsanweisung
GB/US	Instructions for use
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de uso
IT	Istruzioni per l'uso
PT	Manual de instruções
BR	Manual de instruções
NL	Handboek voor gebruik
FI	Käyttöohje
PL	Instrukcja
HR	Uputstvo za upotrebu
CZ	Návod k použití
HU	Használati útmutató
BG	Инструкции за употреба
RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Инструкция по применению продукта
LT	Naudojimo instrukcija
TR	Kullanım kılavuzu
GR	Οδηγίες Χρήσης
CN	使用指南
JP	取扱説明書
AE	عليمات



Inhoud van de verpakking

1. Ommantelde Silikoonring, die over de penis gestulpt wordt.
2. Riemgesp, met die U de riem (3) individueel kunt aanpassen.
3. Elastische riem, die om de taille gegespt wordt
4. Clip, zonder nikkel, waarmee het Vacuümprotectorcondoom wordt bevestigd.
5. Stretchcondoom in 3 maten, die over de penis gestulpt wordt. Bij het stretchen wordt de slang luchtdicht met de clip (4) afgesloten.
6. Protector-dop voor de eikel, om deze bij sterke rekkingen te beveiligen, voor nog sneller succes
7. Pompbal om een vacuüm te genereren
8. Maat-sjabloon
9. Klittebanden (3 stuks)
10. Veiligheidslijn met haakje
11. DVD met productbeschrijving en TV film
12. Gebruiksaanwijzing

Voor de conservatieve behandeling van penisvergroting en peniskromming, en de behandeling van lichte erectiestoornissen, aantoonbaar klinisch getest.

Geachte klant, Hartelijk gefeliciteerd, dat U voor PHALLOSAN® gekozen heeft! PHALLOSAN® heeft zich bij verschillende indicaties bewezen.

Penisvergroting

Het menselijk lichaam heeft een mechanisme, cellen te reproduceren, om verwondingen of belastingen te voorkomen. Allereerst hebben natuurvölker dit ontdekt. Zij hebben het voor cultische redenen gebruikt. Bijvoorbeeld is en wordt het gebruikt om lippen, oorrellen, en natuurlijk ook de penis te vergroten en te verlengen. Door jarenlang gebruik van gewichten bereikten de Karamogong in Noord Oeganda en de zo genoemde Heilige Sadhus in Indie een penisvergroting tot aan 45 cm (Vgl. Enciclopedia Britannica, Stern Nr. 49/95). In Europa deed men bijna een eeuw lang niets met deze wetenschappen en bleven deze in antropologische en etnologische archieven liggen. Het succes van PHALLOSAN® berust op een makkelijk toe te passen pijnloze rekbaarheid van de gehele penis, door het dragen van de riem. Door deze permanente, pijnloze rekking wordt de penis rechtstreeks uit het lichaam getrokken, net als bij Bodybuilding treden er pijnloze microfiberscheuringen op, die in het

lichaam nieuw celmateriaal opbouwen.. Op deze manier wordt de penis langer en, in het bijzonder aan de eikel, dikker, maar niet dunner.

Klinische Studie

Onder het patronaat van Mr. prof.dr.med. Sohn, medisch directeur van het Markus ziekenhuis van de Universiteit Frankfurt, werd in Januari 2005 een klinische studie over de werkzaamheid van PHALLOSAN® afgesloten. De studie was een doorslaand succes. Alle patiënten hadden in deze periode een penisvergroting en penisverdikking bereikt! Het succes van de patiënten was afhankelijk van de dagelijkse draagtijd. De analyse werd op het internationale urologen-congres in Athene gepubliceerd. Daarmee is PHALLOSAN® het enigste penisrekapparaat, dat neutraal aan een Duitse kliniek getest en positief beoordeeld werd.

Retractio Penis

Onder het begrip Retractio Penis doelt men op een toestand, waarbij zich het lid door toeneemende vetlijvigheid in het onderhuidse weefsel terugtrekt. De beste behandelingsmethode is natuurlijk, deze toestand door gewichtsreductie te regenereren. Lukt dit niet naar tevredenheid, bestaat de mogelijkheid, door duurzame rekking van de penis met PHALLOSAN®, het lid weer uit het vetweefsel te trekken. Bij mensen met dwarslasie bij wie dit gegeven door de verlamming

van de buikspieren en de zittende positie in een rolstoel nog wordt versterkt, is het gebruik van PHALLOSAN® evenzo mogelijk, echter nu nog alleen voor mensen met dwarslaesie zonder incontinentie, omdat een condoom voor het gebruik met het laten van reflexurine nog niet ter beschikking staat.

Kleine Penis (Penishypoplasie)

Bij mannen met een aangeboren kleine penis spreekt men van een Hypoplasie van de penis, wanneer de penis ondanks de groei klein blijft (onder de maat van 11–12 cm bij toestand in erectie). Met PHALLOSAN® kan door duurzame rekking van het lid een verlenging tot stand komen. Door de speciale vacuüm methode wordt het lid groter.

Klein gevoelde penis (subjectief gevoelde penishypoplasie)

Onder geen omstandigheden mag men de groep van mannen verwaarlozen of er zelfs om glimlachen, die gewoon het subjectieve gevoel hebben, dat hun penis te kort of te klein is. Onafhankelijk van scholingsgraad zijn er alle standen van de maatschappij vertreden. Hoewel de lengte van hun penis de gemiddelde normgrote heeft, leiden deze mannen psychisch onder de vermeende kleinheid van hun penis. Ze zijn bang voor afkeurende blikken van collega's en vrienden onder de douche of in de sauna. Mannen hebben een peniswaardigheid. Vele mannen voelen zo. Mannen met een grote penis, die

niet geërecteerd is, symboliseren kracht, sterkte en seksuele potentie. Deze subjectief gevoelde penishypoplasie begint vaak in de kinderjaren in school en wordt later gemantefesteed, vaak door ervaringen in de militaire dienst, sport, sauna, etc.

Erectiestoornis (lichte erectile dysfunctie)

In specifieke gevallen was er een positief bijeffect bij het gebruik van PHALLOSAN®. Soms wordt verslag gedaan over een verbeterde erectiekwaliteit en een sterkere sensibilisatie aan de eikel, samen met een sterker lustgevoel bij de bijslaap. Met PHALLOSAN® krijgt de penis door het stretchen met onderdruk een sterkere doorbloeding. Daarom gebruiken vele klanten PHALLOSAN® in het bijzonder op oudere leeftijd, als anti aging therapie, de methode werd ook al "*Bodybuilding voor de penis*" genoemd.

Support na een hormoonbehandeling bij prostaatkanker

Bij de behandeling van prostaatkanker wordt de penis vanwege de onttrekking van hormonen in het verdere verloop kleiner (retractie). Deze verkleining kan door het innemen van Viagra (Sildenafil) of door zwellichaaminjecties (SKAT) op langere tijd niet worden gecompenseerd.. Vanwege de methode leidt een radicale prostaatectomie vaak tot erectiestoornissen en een toenemende retractie van de penis. Sommige urologen dienen daarom Viagra toe of behandelen met zwelli-

chaaminjecties (SKAT). PHALLOSAN® helpt patiënten met prostaatkanker, een postoperatieve penisverkleining succesvol en goedkoop tegen te werken.

Penisverkremming (Penisdeviatie)

Men spreekt van deviatie van de penis als deze vervormt of verkromt is. Dit kan zowel uiterlijk storend zijn als ook geslachtsverkeer pijnlijk maken, ja zelfs onmogelijk maken. De deviatie kan zowel al na de geboorte worden opgemerkt, maar kan later ook ontstaan door bijvoorbeeld verwondingen aan de penis of de plasbuis.

Deze verkremmingen werden tot nu toe alleen door een operatie gecorrigeerd, met als gevolg, dat door de operatietechniek het lid om 3 tot 5 cm korter werd. Bij een operatie word het langere zwellichaampje door het hechten of uitsnijden van het overtollige weefsel aan het kortere zwellichaampje aangepast en de penis wordt op die manier recht gezet. Uiterlijk gezien is de penis na de operatie niet echt aantoonbaar.

Haardvormige verhardingen aan de penis met deelwijze pijnlijke verkremming (Induratio penis plastica, IPP)

Bij deze ziekte ontstaat een meer of minder uitgesproken haardvormige verharding van de zwellichaamhuid door een overschietende vorming van bindweefsel. De oorzaak ervan is nog niet wetenschappelijk bewezen. Het is echter bekend dat bepaalde groepen bijzon-

der aanvallig voor IPP zijn, bijvoorbeeld vele diabetici. De verhardingen (plaques) leiden tot een pijnlijke vertrekking van de penis. Bijslaap wordt zo pijnlijk gehinderd, soms onmogelijk gemaakt. Conservatieve therapieproeven, medicamenteus, door zachte röntgenstraling, electro-mechanische schokgolven of iontophoretische werkstoffenpenetratie ((invooeren van medicamenten via een elektrisch veld) hebben – maximaal - slechts een verlichtend en vaak ook slechts tijdelijk effect. Uiteindelijk is de operatieve correctie door een uitsnijden van deze plaques en dekking van de defecten door kunstmatige of lichaamseigene huid. Men kan zeggen, dat dit ook in de nabije toekomst de enige therapiemogelijkheid blijft. Er is helaas een grote kans, dat de excisie, afhankelijk van de grootte van de verwijderde plaques, tot een beperking of zelfs tot een totaal verlies van de erectie leidt, wat vaak de implantatie van een penisprothese nodig maakt. Natuurlijk is het niet mogelijk, de verhardingen met PHALLOSAN® op te lossen, dit is ook met een operatie onmogelijk. Het is echter mogelijk, het lid recht te maken, indien het zwellichaam door een constante rek in het geheel rechtgetrokken wordt. Met PHALLOSAN® wordt de penis in het geheel rechtgetrokken. Daarom maakt het niet uit, in welke richting de penis gekromd is. De sterkste spanning ontstaat aan de kromming, daarom ontstaan hier pijnloze microfiberscheuren, die in het lichaam nieuw celmateriaal opbouwen. In

een case study van prof. dr. med. Jehle was een patiënt van 61 jaar, hij had een kromming van 90 graden. Na 9 maanden was de kromming bijna verdwenen. De patiënt heeft verslag gedaan, dat hij al na ca. 12 weken weer bijslaap uitgevoerd heeft. Het succes van de therapie met PHALLOSAN® bestaat nog steeds, 6 jaren na het einde van de therapie. En therapiepoging met PHALLOSAN® kan als een voorlopig alternatief tegen operaties worden gezien. In het bijzonder omdat verdere therapieopties altijd mogelijk blijven. Een case study heeft al een klinisch bewijs voor de werkzaamheid van PHALLOSAN® in verbinding met IPP gegeven. Op wens kunt U graag dit bericht verkrijgen. U kunt het ook op Internet onder www.phallosan.nl "Gebruik," – "Haardvormige verhardingen aan de penis" – "Succesvol behandeling van een penisverkromming" nalezen.



Vorbereiding:


Breid PHALLOSAN® voor U uit en stel het met de riemgesp (2) op zijn maximale lengte in. Leg de riem om Uw taille en stel het zo in, dat zich de ommantelde silikoonring (1) en de clip (4) los voor Uw buik onder lichte spanning treffen. Leg aansluitend de riem weer af. Open nog niet de verzegelde stretchcondooms! Volg precies deze aanwijzing. Alleen origineel verzegelde stretchcondooms worden

bij terugzending gratis in Uw maat geruild. De afzender betaald de portokosten. Geopende stretchcondooms mogen niet meer in de handel gaan, ruilen is daarom dan ook niet mogelijk. Wij adviseren, de schaamharen rondom de penis regelmatig te verwijderen, om een inrollen van Uw haren met het stretchcondoom en de daardoor veroorzaakte prikkelingen van de huid bij het afnemen van het condoom te vermijden. Ontharingscrèmes hebben zich hier bewezen, zij zijn verkrijgbaar bij elke drogist.






1. Stel Uw passende condoommaat met de bijgevoegde sjablone vast. Meet aan de penisschacht en aan de eikel van de niet geërecteerde penis.

2. Wij adviseren, de protectordop voor het eerste gebruik te wassen, om poederresten te verwijderen, die bij de productie aangebracht werden, om een aanelkaar kleven van de doppen te vermijden.

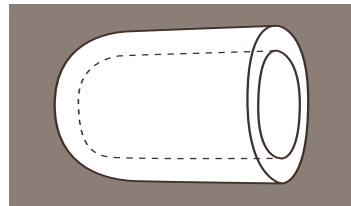


3. Stulp eerst de protectordoppen, net als op de afbeelding beschreven, over de penis. Het maakt niets uit of de voorhuid teruggetrokken is of niet.

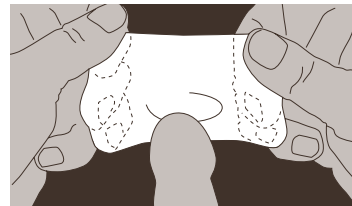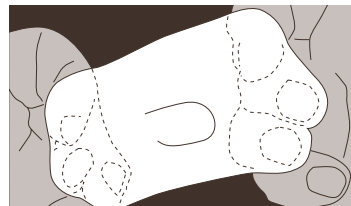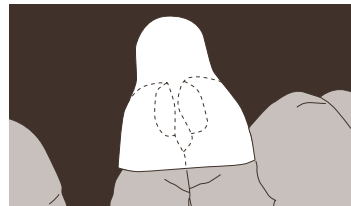

4. Let op dat geen luchtblaas aan de top van de eikel verblijft. De protectordop zal Uw penis tegen de bijeffecten van een eventuele te sterke rekinstelling beschermen. Deze is zacht en past zich aan Uw huid aan.


Neem nu het stretchcondoom met de passende maat uit zijn verpakking. De andere twee origineel verzegelde stretchcondooms kunt U als U deze terugstuurt, gratis in Uw maat ruilen. Wij produceren ook tussenmatten, bijvoorbeeld een "L"-stulp met een "M"-condoom.

Gebruik geen zalven of crèmes, omdat het condoom dan niet blijft zitten en zijn levensduur benadeeld wordt.

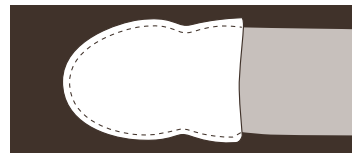

5. Wij willen U nu op een technische bijzonderheid in het gebruik van het condoom attenderen. Stel U voor, dat het, vereenvoudigd, een zuigstulp met pakking is. Daarom is het niet

belangrijk, hoe ver het condoom over de penis-schacht gaat. Het condoom is niet geconstrueerd, om de kracht op de penis te transporteren. Het krachttransport werkt alleen via het vacuüm in de stulp. Het condoom is slechts een pakking tussen zuigstulp en penis-schacht. Verbind de zuigbal met het stretchcondoom. Neem het voor U liggende condoom nu in Uw hand. Geef acht, dat de eikel bij het invoeren in de stulp slechts ongeveer voor de helft wordt ingevoerd. Pas nu wordt het condoom over de penis-schacht afgerold. Zuig nu de eikel met behulp van de zuigbal helemaal in de stulp binnen. Het condoom wordt nu een beetje in de stulp gezogen.


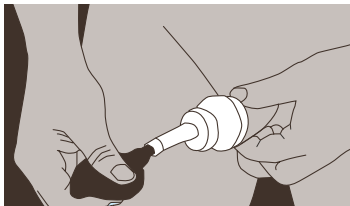


6. De penis is nu in de stulp gezogen. Stulp nu de bobbel van het stretchcondoom over de penis-schacht, terwijl U verder de zuigbal bediend.




Mocht het condoom aan de schacht te los zitten en zich rimpels vormen, breng dan de manchet met de zachte kant naar de binnenkant van het condoom in de richting van de penis-schacht aan, zonder de penis te stranguleren. De manchet is er alleen voor, om eventuele rimpels, die door het stretchen ontstaan, glad te maken. **Als het condoom echter glad aan de penis-schacht zit, wordt de manchet niet benodigd.**


7. Laat de zuigbal, die nu een beetje ingedeukt is, aan het condoom terwijl U de stretchriem aanlegt. Hij zuigt het condoom aan de penis vast.

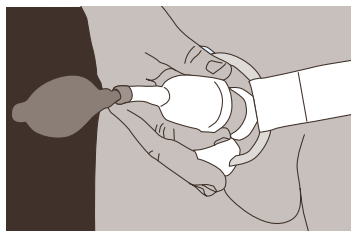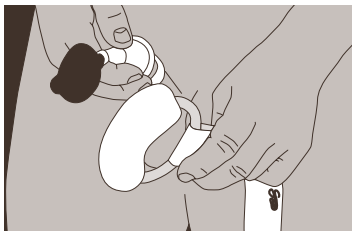


8. Open de metaal-clip aan de andere kant van de riem. Wijd de lengteverstelling van de riem op de maximale lengte. Druk nu het einde van de slang van het condoom net als bij een luchtballon samen, zo dat geen lucht intreedt. Verwijder de zuigbal en verbind het stretchcondoom met de clip. Pas op dat het einde van de slang van het stretchcondoom gecentreerd in de clip wordt gefixeerd.

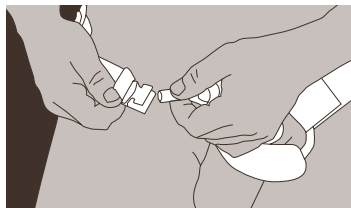

9. Verkort nu de stretchriem, pas op dat de riem aan de lies verloopt. Trek de riem achteraan, aan het zitvlak, naar boven, richting taille. Zit de riem aan de bilploo, wordt bij het zitten de rek-tensie hoger, wat onaangenaam kan zijn.

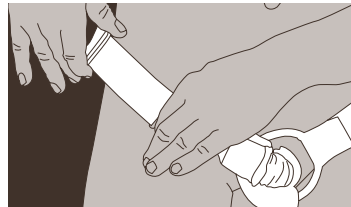

Als veiligheidslijn dienen de haakjes ervoor, de twee riemeinden los te verbinden, om bij een eventueel afzakken van de clip deze niet naar achteren te laten schieten.



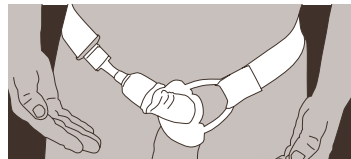


Onderhoud:

Het condoom mag niet an de stulp worden afgetrokken en mag vanuit hygiënische redenen een keer per dag met zeep lauwwarm gewassen worden. Verwijder bij het wassen de groene spons en reinig deze s.v.p apart. Vergeet niet, het gedroogde, ingerolde condoom na gebruik aan de buitentkant met Takum, verkrijgbaar in elke sportwinkel, in te poederen. Gebruik geen babypoeder, omdat deze vethoudende Anilin bevat. Bewaar het condoom ingerold tot het volgende gebruik. Rol pas dan het condoom weer uit. Op die manier vermijdt U, dat het condoom uitlubbert en verkleeft.

Op deze manier kunt U het condoom makkelijk weer terugrollen:

Poeder het condoom afgerold buiten met vet-vrije poeder (Talkum) in en klem het slangachtige einde tussen Uw knieën. U heeft nu beide handen vrij.

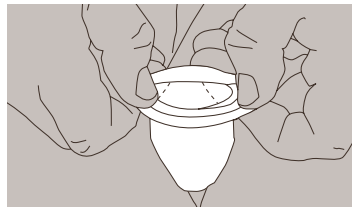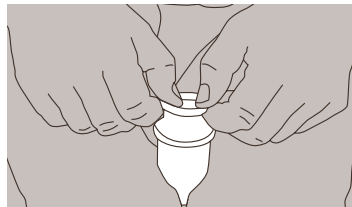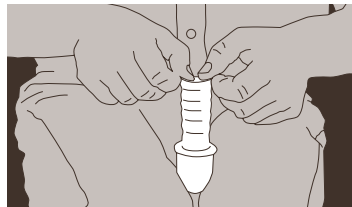

Rol het condoom voorzichtig achter de rand van de binnenliggende stulp. Pas s.v.p. op en

beschadig het condoom niet met lange vingernagels o.d.

Stappenplan voor het exacte aanpassen van de rekracht op het bindweefsel van de penis.

Voorwoord:

Het bindweefsel van het lichaam is afhankelijk van de respectievelijke erfactoren. Daarom zijn er sterke individuele verschillen. Een uniforme instelling van de rekracht naar gram/kilogram is geneeskundig onverantwoordelijk. Daarom hebben wij een stappenplan ontwikkeld, die het mogelijk maakt, de riemtensie exact aan Uw bindweefsel aan te passen. Op deze manier kunt U optimale resultaten bij een penisverlenging in lengte en dikke zonder negatieve bijeffecten bereiken.

Eerste dag:

Stel de riem, naar Uw gevoel, niet te sterk in en draag hem s.v.p. slechts een uur. Open de riem en neem het condoom af. Beoordeel nu de plek aan de penis, die tussen de opening van de plasbuis en het bandje aan de voorhuid ligt. Dit is de sensibelste weefselplek aan de penis! Heeft deze plek roodkleuringen of is het aangezwollen, was de rektensie van de riem al te groot. Sluit dan het gebruik voor deze dag af. Is er geen kleurverandering, markeer de riem aan de duwgesp. Sluit ook in dit geval het gebruik voor deze dag af.

Tweede dag:

Patiënten met een roodkleuring van de vorige dag: Was er de dag ervoor een roodkleuring aan de genoemde plek, of was deze aangezwollen, dan draag het weer een uur onder gereduceerde trektensie. Beoordeel nu na een uur de plek aan de penis, die tussen de opening van de plasbuis en het bandje aan de voorhuid ligt.

Heeft deze roodkleuringen of is het aangezwollen, was de rektensie van de riem weer te groot. Sluit dan het gebruik voor deze dag af. Patiënten zonder roodkleuring of zwelling van de vorige dag: Draag het nu twee uren lang en beoordeel dan weer de genoemde plek. Als er geen roodkleuring of zwelling is, draag het de volgende dag een uur langer.

Derde dag en volgende dagen t/m 8ste dag:

Patiënten met en zonder roodkleuring of zwelling van de eerste dag: Was het voor U mogelijk, de riem aan de tweede dag zonder kleuringen of zwellingen aan de genoemde plek te dragen, draag dan de riem aan de derde dag drie uren lang. Zijn er roodkleuringen of zwellingen na drie uren, reduceer de rektensie en herhaal de draagtijd op de volgende dag. Was er geen roodkleuring of zwelling, dan verleng de draagtijd elke dag om een uur.

Is er binnen de volgende dagen een roodkleuring of zwelling aan de plek tussen de

opening van de plasbuis en het bandje aan de voorhuid aan de onderzijde van de eikel, markeer deze plek met een pen aan de riem en draag de riem de volgende dag zonder gereduceerde rektensie. Pas op dat de groene schuimstofschiif aan de eikel aandrukt. Volg s.v.p. dit plan.

U zult enthousiast zijn over het dragen van PHALLOSAN®, de penis wordt binnen enkele maanden meetbaar langer en dikker. U zult alleen positieve bijeffecten, zoals sterke seksuele stimuli en lustgevoel zonder voortijdige ejaculatie, voelen. Oorzaak: De penis wordt tijdens het gebruik van PHALLOSAN® sterker doorbloedt. Dat heeft een positief effect op het hele weefsel en de zenuwvelden. Veel succes!

Gebruiksduur

Het beste is, Phallosan® 8-10 uren per dag te dragen. Het is echter ook altijd mogelijk, het langer te dragen! Vergeet s.v.p. niet, elke 3-4 uren een pauze van ca. 5 minuten te maken om het stretchcondoom af te nemen en om de penis ca. een minuut lang te masseren. Na ongeveer 8 dagen is dit niet meer nodig. Hoe langer het dagelijkse gebruik is, hoe sneller het succes!

Vele klanten gebruiken Phallosan® t/m 12 uren per dag, met bijbehorend succesvol resultaat. Vanwege de gezondheid kunt U het stretchcondoom (bacteriële infectiekans) het beste een keer per dag met zeep lauwwarm wassen.

PHALLOSAN® kan ook 's nachts worden gedragen. Mochten er tijdens de slaap erecties optreden, breidt zich het condoom mee uit.

Bijeffecten, voorzorgsmaatregelen.

Het gebruik van PHALLOSAN® gebeurt op eigen risico. Als U zich aan de gebruiksaanwijzingen houdt is het echter onbedenklijk. Echter is het beter, in het bijzonder in de eerste weken van gebruik, geen te sterke rek op de penis uit te oefenen.

Wen het weefsel aan PHALLOSAN® en stel de riem (3) in het begin slechts op een lichte rek in. Onderzoek in het begin de penis elk uur naar kleuringen (indicator voor doorbloedingsstoornissen) en zwellingen. Als er echter toch kleuringen, bijzonders vlakbij de plasbuis, optreden, open s.v.p. meteen de riem (3) en kijk naar doorbloedingsstoornissen en zwellingen van de penis.

Als er zwellingen en/of blaasjes aan de voorhuid of aan de eikel optreden, is de riem (3) te sterk ingesteld. Pauzeer dan s.v.p. in ieder geval, totdat de zwelling of de blaasjes verdwenen zijn. Heb s.v.p. geduld, want de methode om de penis te vergroten is vergelijkbaar met een kaakregulatie. De continuïteit van de rekking, niet alleen de rekracht, is belangrijk voor het succes!

Ook onder volgende omstandigheden kunt U PHALLOSAN® beter niet gebruiken: na alcoholgebruik, na gebruik van drugs en pijnstillende medicamenten, slaap- en kal-

meringsmiddelen, omdat zich hierdoor het natuurlijke pijngevoel vermindert. In verbinding met infecties of open wonden aan de penis, en bij bloedvat- en weefselzwakte is het gebruik van PHALLOSAN® te vermijden.

Hoe kan ik exact de lengtegroei van de penis meten?

Gebruik s.v.p. een meetlat. Houd de penis in een niet-geërecteerde toestand rechtstreeks weg van het lichaam (90 graden). Leg de meetlat, van boven bekeken, zijdelijk aan de penis. Druk nu de meetlat tegen het schaambeentje. Op deze manier kunt U de lengte van de penis meten. Doe het op dezelfde manier, als U de groei in een geërecteerde toestand wilt meten.

Belangrijk: Stel voor het begin van het gebruik Uw exacte lichaamsgewicht zonder kleding vast. Bij een eventuele gewichtstoename ontstaat in het bijzonder in het schaambereik rondom de penis een vetlaag. Deze vetlaag verkort de afstand tussen de spits van de penis en schaambeentje, het resultaat wordt op deze manier vervalst (verkort). Dokters noemen dit een vetschort.

Alle delen van PHALLOSAN® kunnen separaat worden nabesteld. Als U verdere vragen of suggesties heeft, kunt u altijd onze experts gratis (normaal telefoontarief) bereiken.

Technische wijzingen voorbehouden. Deze worden ook in het internet onder www.phallosan.nl publiek gemaakt.

Contact in Duitsland,

HGB AG
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Duitsland

Tel.: +49 81 77 93 16 10
Fax: +49 81 77 93 16 20

mailto: info@hgbag.com
Phalomed, 11.2009

Profiteer van de vriendschapswerving van PHALLOSAN®

Het loont zich, PHALLOSAN® bij anderen aan te bevelen. Voor elke nieuwe klant, die, door Uw advies als bestaande klant van PHALLOSAN® bij ons via een van onze webpagina's, per brief of per telefoon PHALLOSAN® koopt en daarom een klantnummer krijgt, bedanken wij ons met een waardebon ter waarde van 43 Euro incl. verzendkosten voor een stretchcondoom in een maat van Uw keuze.

Ik was al klant van PHALLOSAN® en heb een nieuwe klant van de prestaties van PHALLOSAN® overtuigd.

Rekeningnummer _____

Naam _____

Straat, huisnummer _____

Postcode, Plaats _____

De door mij verworven klant is:

*Voorwaarden: De order van de verworven nieuwe klant moet dwingend chronologisch na de order van de wervende klant bij het HGB AG oftewel Phalomed Ltd. binnenkomen, en loopt op 31 December 2010 uit (einde van de actie). Zakelijke klanten zijn van de deelname uitgesloten. De verzending van de waardebon aan de wervende klant gebeurt na afloop van het wettelijke retributierecht van de verworven klant. Een contante uitbetaling van de waardebon is uitgesloten.

Naam _____

Rekeningnummer _____

Mijn stretchcondoom ten waarde van 38 € heb ik in volgende maat nodig (s.v.p. aankruisen):

S = S stulp met S condoom

MS = M stulp met S condoom

M = M stulp met M condoom

LM = L stulp met M condoom

L = L stulp met L condoom

XL = XL stulp met XL condoom

S.V.P. invullen en sturen aan:

**HGB
Marketing – Product Management
Am Wallgraben 18
D-82541 Münsing
Deutschland**

Sluiting van de inzendingstermijn: 31 December 2010