



PHALLO♂SAN®

DE	Gebrauchsanweisung
GB/US	Instructions for use
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de uso
IT	Istruzioni per l'uso
PT	Manual de instruções
BR	Manual de instruções
NL	Handboek voor gebruik
FI	Käyttöohje
PL	Instrukcja
HR	Uputstvo za upotrebu
CZ	Návod k použití
HU	Használati útmutató
BG	Инструкции за употреба
RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Инструкция по применению продукта
LT	Naudojimo instrukcija
TR	Kullanım kılavuzu
GR	Οδηγίες Χρήσης
CN	使用指南
JP	取扱説明書
AE	عليمات



Opis:

1. Pierścień silikonowy, pokryty pianką, zakładany na członka
2. Klamra do regulacji pasa (3) pozwalająca na indywidualne dopasowanie pasa;
3. Pas elastyczny zakładany wokół talii
4. Zapinka nie zawierająca niklu utrzymująca rozciągliwy kondom
5. Wytrzymały, rozciągliwy kondom dostępny w trzech rozmiarach, zakładany na członka.
Na rozciąganiu jest dętka z klipem (4) hermetycznie zamknięta.
6. Nakładka ochronna na żołądek do jego ochrony przy silnym naciągu, zapobiega powstawaniu opuchnięć i zaczerwień skóry przy zbyt silnym naciągu.
7. Pompka
8. Szablon pomiarowy
9. Taśmy samopszylepne (3 szt.)
10. Linia z hakiem
11. Płyta DVD z opisem produktu i filmem
12. Instrukcja obsługi

W leczeniu powiększenia, krzywego penisa i zakłóceń erekcji (dysfunkcje lekkiego rodzaju), z powodzeniem klinicznie testowane.

Pragniemy pogratulować Ci wyboru przyrządu PHALLOSAN®! Skuteczne działanie PHALLOSAN® zostało dowiedzione w wypadku wielu schorze.

Powiększenie penisa

Organizm ludzki ma zdolność po podrażnieniu do replikacji komórek. Po pierwszy raz ten mechanizm został uznana przez prymitywne ludy i wykorzystany w celach kultury. On jest używany do rozszerzenia lub powiększenia ust, uszy i penisa. Przez lata Karamogongi w północnej Ugandzie osiągnęły przez stosowania wag do rozszerzenia penisa około 45 cm. (Vgl. Enciclopedia Britannica, Stern Nr. 49/95). Prawie sto lat spoczywała ta wiedza w Niemczech w antropologicznych i etnologicznych archiwach. Zasada PHALLOSAN® opiera się na ciągłym i delikatne rozciąganie penisa. Specjalne działanie próżniowe i trwałe, bezbolesne rozciąganie penisa jest stymulowane w całości na tworzenie nowych komórek. Ogólnie jest grubszy i się przedłuża.

Badanie kliniczne

Pod rządem prof dr Sohn, główny lekarz niemieckiej klinice urologicznej Markuskrankenhau, Goethe-Universität Frankfurt am Main, zostały w styczniu 2005 r. badania kliniczne

na skuteczność o PHALLOSAN® zakończone. Dane te były stwierdzane i oceniane przez lekarza.

Wszyscy pacjenci mieli wzrost długości, jak również w obwodzie. Szczególne sukcesy pacjenta zależy przede wszystkim od czasu rozciągania. Analiza została publikowane z okazji międzynarodowego kongresu urologów w Atenach.

PHALLOSAN® jest jedyne urządzenie, które jest neutralnie i pozytywnie w niemieckiej klinice testowane.

Penis Retractio

Retractio penisa jest stan, w którym penis się ze względu na rosnącą otyłością w podskórnej tkance tłuszczowej chowa. Najlepsze "leczenie" jest, oczywiście, zmniejszenie masy ciała. Jak ten sukces nie jest zadowalający, można rozciągnąć penisa z PHALLOSAN®, żeby go z tkanki tłuszczowej wyciągnąć. Dla paraplegics, gdzie to zjawisko jest pogorszone bo mięśni brzucha i pozycja siedzą na wózku inwalidzkim jeszcze zwiększają efekt. Tutaj jest stosowanie PHALLOSAN® również możliwe. Choć obecnie nie dla paraplegic które nie umią trzymać uryny.

Hipoplazja penisa (niedorozwój penisa)

la mężczyzny, którzy rodzą się z małym peni- sem to się nazywa hipoplazja penisa, jak długość penisa w wyprostowanym czasie jest tylko 11–12 cm długi. Przez ciągłe rozciąganie penisa z PHALLOSAN® i specjalnego

procesu próżniowego zwiększa się długość również wielkość penisa.

Przeczcucie niedorozwoju penisa (subiektywna hipoplazja penisa)

W żadnym przypadku nie będziemy się troszczyć w grupie mężczyzn, które po prostu subiektywnie czuje, że ich penis jest zbyt krótki lub zbyt mały. Wszystkie warstwy społeczeństwa są reprezentowane, niezależnie od wykształcenia. Choć długość swojego penisa w stanie wyprostowanym osiągnie średniej standardowej wielkości, mężczyźni często cierpią emocjonalnie podłym penilem. Oni się obawiają ocenie okiem kolegów i przyjaciół w prysznicie lub sauny. Mężczyźni mają penisa wartości. Wielu ludzi czuje się w ten sposób. Mężczyźni z dużym penilem stoją na siłę, moc i wytrzymałość seksualną. Subiektywna hipoplazja penisa często zaczyna się w dzieciństwie, w szkole, a później często przejawia się poprzez doświadczenia wojskowe, sportowe, sauna itp.

Lże zaburzenia erekcji

W czasie zastosowania PHALLOSAN® była w niektórych przypadkach zgłoszona poprawa jakości wrażliwości na żołądki i zwiększonej przyjemności w korzystaniu. Z PHALLOSAN® jest penis przez rozciąganie energią próżniową lepiej dostarczony z krwią. Wielu użytkowników korzysta z PHALLOSAN® w wieku jako terapia przeciw starzeniu. Procedura nawet nazywa się "Kulturytyka dla penisa".

Wsparcie po hormonalnej terapii w przypadku raka prostaty

W trakcie leczenia raka prostaty występuje przez odebranie hormonów wycofanie penisa (retrakcja). W perspektywie długoterminowej ta obniżka nie może być kompensowana przez Viagre lub wstrzykiwań do ciała jamistego.

Ale nawet po radykalnej prostatektomii często prowadzi to do zaburzenia erekcji i skrócenia penisa które doprowadziło już niektórych urologów do zarządzania zabiegu z sildenafilem w celu zapobiegania lub wstrzykiwań do ciała jamistego. Z PHALLOSAN® metodą ten problem może zostać rozwiązany skutecznie i ekonomicznie.

Deformacja penisa (skrzywienie penisa)

Deformacja penisa jest skrzywieniem penisa. Zależny od stopnia krzywizny może penis pod względem estetycznym przeszkadzać, ale również wpływać na stosunek seksualny i być bolesnym.

Zakłócenia mogą istnieć od urodzenia. Ale może on wystąpić również później, na przykład po urazie penisa. Do dzisiaj te deformacje zostały całkowicie skorygowane chirurgicznie, ale w związku z czym penis nawet stracił o 3–5 cm.

Podczas operacji, jest długi splot naczyń przez "szycie" lub wycinanie nadmiaru tkanek z tym krótszym dostosowany żeby penis się więc wyprostował. Wygląd członka po operacji nie jest dokładnie imponujące.

Twardnienie w kształcie okrągłej formy na penisie

W tej chorobie twardnieją penis i dostają one okrągłe kształty przez nadmierne tworzenie się tkanki łącznej. Powodem tego jeszcze nie może być naukowo stwierdzone.

Tylko niektóre grupy ludzi okazały się być podatne na IPP, w tym na przykład, wielu chorych na cukrzycę. Twardnienie prowadzi do bolesnego zniekształcenia penisa, która utrudnia ruch seksualny, albo niemożliwy. Konserwatywne leczenie, czy z lekami, przez miękkiego promieniowania rentgenowskiego, electro-fale wstrząsów lub jontoforetyczny penetracji leku (podawanie leków za pomocą pola elektrycznego) mają – jeśli w ogóle – jedynie objawowy efekt.

Ostatecznością jest chirurgiczna korekta przez wycięcie blaszki i wynikające z wady materiału alloplastic lub allogenicznego i autologicznego. Oczekuje się, że tak to będzie w najbliższej przyszłości jedyna możliwość leczenia ciężkich przypadków. Na wysoki odsetek wycięcie w zależności od wielkości tablic usunięto niestety do zmniejszenia lub całkowitej utraty erekcji, które często mogą być kompensowane przez wszczęcie protez prącia.

Oczywiście PHALLOSAN® nie może rozwiązać lub usunąć stwardnienia penis, to też nie jest to możliwe przez operacje. Ale może być ponownie wyprostowanie penisa przez regenerację tkanek i komórek i działania pod mechanicznym rozciąganiem. W sumie penis

jest z PHALLOSAN® tylko wyprostowany, natomiast nie ma znaczenia, w jakim kierunku penis jest zakrzywiony.

Na zakrzywionym ciele stanowi największe napięcie, więc tutaj jest bezbolesne tworzenie większej liczby nowych komórek. W studium przypadku prof dr Jehle był pacjent, 61 lat, miał skrzywienie 90 stopni. Po około 9 miesięcy, krzywizny prawie nie ma. Pacjent już zgłoszone po upływie około 12 tygodni po raz kolejny skorzystał ruchu. Powodzenie leczenia PHALLOSAN® trwa do dziś, na niezmiennym poziomie 6 lat po zakończeniu leczenia. Leczenie PHALLOSAN® jest zawsze zalecane jako tymczasowy alternatywę dla chirurgicznego środków.

Ta terapia jest możliwa ponieważ na dalsze możliwości leczenia nie ma żadnego wpływu. Dowodów kliniczny na skuteczne leczenie skrzywienie penisa (IPP) został jasnie świadczony w badaniach przypadku. Chętnie możesz wybrać opcję otrzymywania tego raportu medycznego.

Można go pobrać w Internecie pod adresem www.phallosan.cz. Od "wniosek" – "twardnienie w kształcie okrągłej formy na penisie" – "dowody kliniczne: Skuteczne leczenie skrzywienia penisa.




Wstęp

Rozłóż elementy zestawu PHALLOSAN® przed sobą i zapnij pas klamrą (2), tak aby pas miał największy możliwy obwód. Umieść pas na talii i dopasuj go tak, aby pierścień silikonowy (1) i zapinka (4) dopasowały się z przodu a naciągnięcie było nieznaczne. Następnie zdejmij pas.


Nie otwierać jeszcze zamkniętych prezerwatywy! Proszę dokładnie czytać instrukcje. Oryginalnie zamknięte prezerwatywy innej wielkości zostaną zastąpione nieodpłatnie w twoim rozmiarze. Koszty wysyłki ponosi nadawca. Otwarte prezerwatywy odcinka nie dur fen w handlu, do wymiany jest wyłączone.

Zaleca się, aby regularnie golić włosy łonowe wokół członka. Dzięki temu nie będą one wchodziły do kondoma i powodowały podrażnienia i bólu przy zdejmowaniu przyrządu. W tym celu można użyć każdego kremu depilującego dostępnego w sklepach.



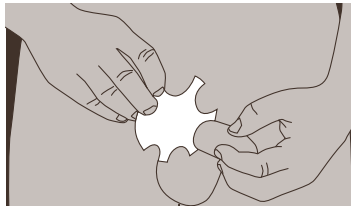


1. Zmier obwód swojego penisa, przy pomocyłączonego szablonu.

2. Przed pierwszym użyciem umyj nasadkę ochronną, aby usunąć resztki pudru stosowanego podczas produkcji w celu zapobieżenia sklejanii się nasadek.

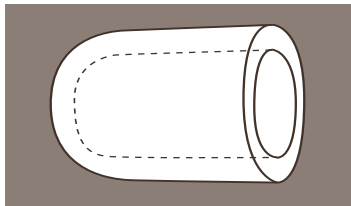


3. Najpierw nałóż nasadkę na penisa w sposób przedstawiony na ciach. Nie ma przy tym znaczenia, czy napletek pozostanie na żołądzu, czy zostanie zsunięty. Uważaj, aby na końcu nasadki przy żołądzu nie pozostały pęcherze powietrza.

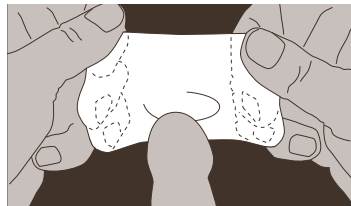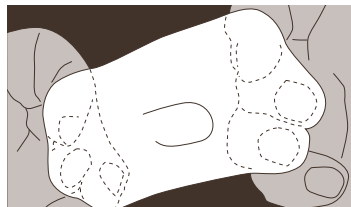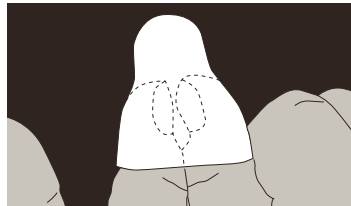


4. Tylko to należy uwzględnić podczas nakładania nasadki. Ta nasadka ma na celu ochronę penisa przed skutkami ewentualnego silnego ciągu. Jest ona miękka i przylega do skóry.

Teraz weź przygotowaną prezerwatywę typu stretch. Oryginalnie zamknięte prezerwatywy innej wielkości zostaną zastąpione nieodpłatnie w twoim rozmiarze. My mamy różne wielkości też napszykład L-kapturek z M kondomem. **Nie używaj żadnych maści lub kremów, ponieważ znacznie osłabią one przyczepność kondoma.**

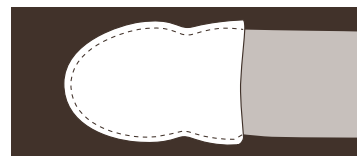

5. Chcielibyśmy teraz zwrócić uwagę na funkcję techniczną w zakresie stosowania stretch prezerwatywy. Należy pamiętać, że jest on przedstawiany dzwon do ssania z uszczelką. Dlatego nie jest ważne ile prezerwatywa przechodzi na penisa. Prezerwatywa nie jest przeznaczona do przekazywania siły na penisa. Moc jest przekazywana wyłącznie poprzez próżni w dzwonie. Prezerwatywa jest tylko uszczelnienie między przyssawką i penisem. Połącz bańki z stretch prezerwatywą. Teraz weź przygotowaną prezerwatywę typu stretch w ręce, Upewnij się, że żołądz podczas wprowadzania w dzwon wnika tylko do połowy. Dopiero teraz rozwinąć prezerwatywę w celu uszczelnienia na penisie. Przyłączyć gruszkę ssącą do prezerwatywy i naciskając ją, wessać żołądz w kapturek. Stretch prezerwatywa jest wciągnięta.

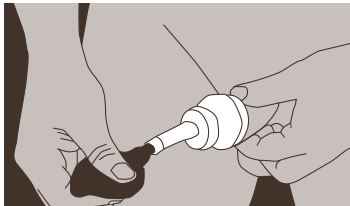


6. Penis jest teraz wessany w kapturek. Rozwinąć teraz prezerwatywę aż do nasady penisa przy jednoczesnym dalszym naciskaniu gruszki ssącej.




Jeśli prezerwatywa na jego penisa jest luźna i ma formę zmarszczki, użytkownik uzyskuje mankiet z puszystą stroną do wewnątrz w kierunku prezerwatywy na penisa bez uduszenia podczas penisa. Mankiet jest używany tylko do ewentualnego opracowania zmarszczek, które powstają przez stretch. Gdy prezerwatywa się gładko i pez zmarszczek na penisa ułoży, mankiet jest nie potrzebny.

7. Gdy będziesz dopasowywał elastyczny pas, pompka ma swobodnie wisieć, co pozwoli na samoczynne usunięcie powietrza


z kondoma. Dzięki zassaniu kondom będzie trzymał się na swoim miejscu.

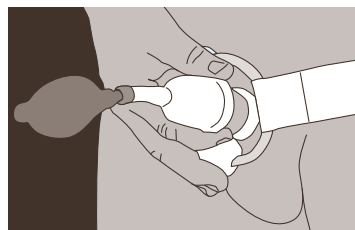


8. Otwórz metalową zapinkę z którejkolwiek strony pasa. Rozciągnij pas najszerzej jak to możliwe. Następnie ściśnij palcami koniec kondoma (tak jak koniec balonu), aby do jego wnętrza nie dostało się powietrze. Odłącz pompkę i przyłącz elastyczny kondom do zapinki. Należy się upewnić, że drugi koniec kondoma jest przytwierdzony po środku zapinki.

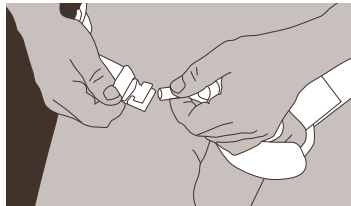

9. Skrócić pasek, zwracać uwagę na to, czy pasek przebiega w pachwinie. Pociągnąć pasek z tyłu przy pośladkach do góry w kierunku talii.

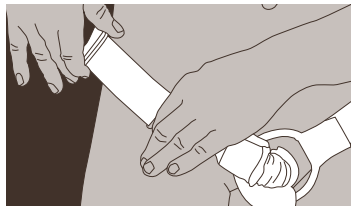

Jeśli jest umieszczony na pośladkach, podczas siedania zwiększa się naciąg, co może powodować dyskomfort.

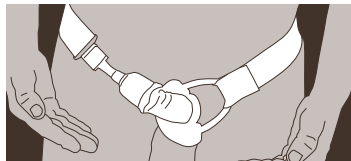



PIELĘGNACJA:

Ze względów higienicznych (ryzyko infekcji bakteryjnej) kondom powinien być czyszczony raz dziennie letnią wodą z dodatkiem mydła. Usuń przy mycie zieloną gąbkę i oczyść ją oddzielnie. Proszę nigdy nie zapomnieć używane prezerwatywy po użyciu w stanie rozwijającym na zewnątrz posypać pudrem bez tłuszczu (talku), który otrzymasz w każdym sklepie sportowym. Proszę nigdy nie stosować proszku dla niemowląt, ponieważ jest mieszany z kwasami aniliny. Przechowywać prezerwatywy w stanie rozwijającym, aż go użyć ponownie. Prawidłowo tylko wtedy rozwija się prezerwatywy z powrotem. Tak unikasz ugięcia i przyklejanie prezerwatywy.

Delikatnie zwinąć kondom spowrotem:

Proszę kondom posypać pudrem bez tłuszczu (talk) i koniec kondoma należy uchwycić między kolanami.

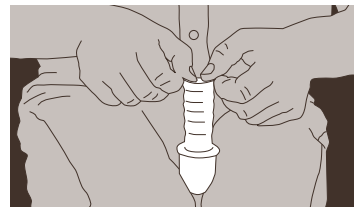

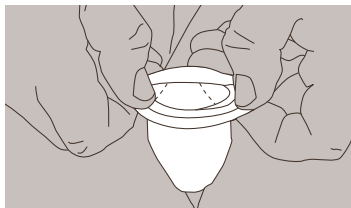

Obie ręce są wolne, więc można nimi delikatnie zwinąć kondom, wzdłuż wyrzuczenia. Należy szczególnie uważać, aby nie zniszczyć kondoma ostrymi paznokciami itp.

Dokładne dopasowywanie naciągnięcia wywieranego przez pas na tkankę łączną członka.

Wprowadzenie:

Własności tkanki łącznej są zależne od indywidualnych cech genetycznych i są bardzo zróżnicowane. Dlatego też z medycznego punktu widzenia nieodpowiednie byłoby zalecanie określonego naciągnięcia na podstawie masy (gramów/ kilogramów). Z tego powodu

opracowaliśmy harmonogram, który krok po kroku pozwoli ci określić napięcie odpowiednie dla twojej tkanki łącznej. W ten sposób otrzymasz najlepsze rezultaty – penis stanie się dłuższy i grubszy bez żadnych szkodliwych efektów ubocznych.

Dzień pierwszy:

Dopasuj pas tak, abyś czuł się wygodnie i noś go przez godzinę. Następnie rozepnij pas i usuń kondom. Przyjrzyj się uważnie penisowi, a w szczególności okolicy pomiędzy ujściem cewki moczowej a wędzidełkiem (fałdem skóry na spodniej stronie żołądź). Jest to najbardziej wrażliwa część penisa! Jeżeli miejsce jest zaczerwienione lub spuchnięte, oznacza to, że pas został naciągnięty zbyt mocno. Nie używaj przyrządu przez jeden dzień. Jeżeli nie zauważyłeś zmian w kolorze skóry, oznacz miejsce zapięcia na klamrze regulującej długość pasa. Również skończ teraz noszenie.

Dzień drugi:

Pacjenci z zaczerwienieniem lub opuchlizną z dnia poprzedniego: Jeżeli zauważyłeś zaczerwienienie lub opuchliznę w wyżej opisanym miejscu, zmniejsz napięcie pasa i noś go przez godzinę. Po godzinie sprawdź stan okolicy pomiędzy ujściem cewki moczowej a wędzidełkiem (fałdem skóry na spodniej stronie żołądź). Jeżeli miejsce jest zaczerwienione lub spuchnięte, oznacza to, że pas został ponownie zbyt mocno naciągnięty. Nie używaj przyrządu przez jeden dzień. Pacjenci

bez zaczerwienienia lub opuchlizny z dnia poprzedniego: Wydułż czas noszenia pasa do dwóch godzin, a następnie ponownie sprawdź stan opisanego miejsca. Jeżeli nie zauważysz zaczerwienienia lub opuchlizny, następnego dnia wydłuż czas stosowania przyrządu o kolejną godzinę.

Dzień trzeci do ósmego:

Pacjenci z i bez zaczerwienienia i opuchlizny z dnia pierwszego: Jeżeli drugiego dnia jesteś w stanie nosić pas bez pojawienia się zaczerwienienia i opuchlizny w opisanym miejscu, trzeciego dnia noś pas przez trzy godziny. Jeżeli wówczas pojawi się zaczerwienienie lub opuchlizna w opisanym miejscu, następnego dnia należy zredukować napięcie pasa i powtórzyć noszenie pasa przez taki sam okres czasu jak poprzednio. Jeżeli nie wystąpiło zaczerwienienie lub opuchlizna, należy przedłużyć czas noszenia pasa o godzinę codziennie. Jeżeli w ciągu najbliższych dni zaczerwienienie lub opuchlizna pojawiają się w okolicy cewki moczowej i wędzidełka, należy zmniejszyć naciągnięcie pasa, oznaczyć miejsce zapięcia pasa pisakiem, a następnego dnia nosić pas zapięty z mniejszym naciągnięciem. Upewnij się, że zielona gąbka jest umieszczona na żołądź. Przestrzeganie tego planu krok po kroku pozwoli uczynić noszenie PHALLOSANu przyjemniejszym. Już po kilku miesiącach twój penis stanie się widocznie dłuższy i grubszy. Doświadczysz jedynie pozytywnych skutków ubocznych w postaci

silniejszego pociągu seksualnego przyjemniejszych doznań bez przedwczesnego wytrysku. Wyjaśnienie: Noszenie PHALLOSANu stymuluje krążenie krwi w penisie, co ma pozytywny efekt na całość tkanek i zakończeń nerwowych. Życzymy powodzenia!

Czas noszenia:

PHALLOSAN® powinno nosić się przez przynajmniej 8–10 godzin dziennie, a najlepiej dłużej. Nie należy też zapominać o około pięciominutowej przerwie, którą należy zrobić co 3–4 godziny. Należy wtedy zdjąć kondom i masować członka przez około minutę. Po około 8 dni, nie jest to już konieczne. Przerwy nie wpływają negatywnie na wynik, a wręcz przeciwnie, wzmacniają efekt izometryczny. Im dłużej nosi się przyrząd tym szybciej widać efekty. Wielu klientów nosi PHALLOSAN+ przez 12 godzin dziennie ciesząc się przy tym rezultatami proporcjonalnymi do okresu noszenia. Ze względów higienicznych (ryzyko infekcji bakteryjnej) kondom powinien być czyszczony raz dziennie letnią wodą z dodatkiem mydła. PHALLOSAN® może być noszone w nocy, ponieważ prezerwatywa się też podczas nocnych erekcji rozciąga.

PHALLOSAN+ jest używany na własne ryzyko. Przyrząd jest zupełnie bezpieczny, jeżeli stosuje się go zgodnie z instrukcją. Szczególnie w pierwszych tygodniach nie

należy wywierać silnego naciągnięcia na członka, ponieważ istotne jest, aby tkanka stopniowo przyzwyczajała się do przyrządu. Początkowo pas (3) należy zapiąć tak, aby wywierał on jedynie lekkie napięcie, a stan członka należy sprawdzać co godzinę pod kątem pojawiających się odbarwień (oznaka złego krążenia) i opuchlizny. Jeżeli pojawią się przebarwienia (szczególnie wokół cewki moczowej), ból lub opuchlizna, należy natychmiast rozpiąć pas (3). W takiej sytuacji należy poczekać aż wyżej wymienione objawy ustąpią, a następnie lekko zredukować napięcie pasa (3). Ważna jest cierpliwość.

Powiększanie członka można porównać do wyrównywania zębów – liczy się ciągłość całego procesu rozciągania, a nie siła rozciągania.

Nawet w tych okolicznościach, nie należy nosić PHALLOSAN®:

– po wypiciu alkoholu, lub – po zażyciu narkotyków i leków przeciwbólowych, uspokajających i snu, ponieważ jego naturalne uczucie może mieć wpływ na noszenie pasa podczas snu. Unikaj używania PHALLOSAN® jak masz zakażenia lub otwarte owrzodzenia na penisie.

Jak można dokładnie zmierzyć długość członka?

W tym celu należy użyć linijki. Przytrzymaj członka w stanie spoczynku pod kątem 90 stopni w stosunku do ciała. Linijkę

należy przyłożyć z jednej strony członka, tak aby jej koniec dotykał kości łonowej. Następnie należy odczytać długość członka. Te same czynności należy powtórzyć dla członka w stanie pełnej erekcji.

Uwaga: Przed rozpoczęciem kuracji należy zważyć się (bez ubrania). Jeżeli w trakcie kuracji waga wzrośnie, będzie można zauważyć jak wokolicy łonowej uformuje się warstwa tkanki tłuszczowej. Ta warstwa sprawi, że skróci się dystans od kości łonowej do końca członka – lekarze nazywają to fartuchem brzuszny.

Wszystkie części od PHALLOSAN® mogą być zamówione. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub sugestie, nasi specjaliści są zawsze dostępne przez telefon.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych w dowolnym czasie. Ozmianach poinformujemy na stronie www.phalosan.com/pl

Osoba kontaktowa w Niemczech:

HGB AG
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Niemcy

Tel.: +49 81 77 93 16 10
Fax: +49 81 77 93 16 20

mailto: info@hgbag.com
Phalomed, 11.2009

Skorzystaj z reklamy przyjaciela o PHALLOSAN®

PHALLOSAN® wciąż zalecać a się oplaca. Dla każdego nowego klienta, który kupuje poprzez zalecenie przez istniejącego klienta od PHALLOSAN® i u nas przez naszą internetową stronę, na piśmie lub telefonicznie PHALLOSAN® kupi i u nas się zarejestruje z numerem klienta, podziękujemy państwu w formie bon o wartości € 43, – w tym wysyłka i prezerwatywa w wielkości do wyboru.

Ja już byłem klientem PHALLOSAN® i mam nowego przekonanego klienta o PHALLOSAN®.

Numer rachunka _____

Imię _____

Ulica, numer domu. _____

Pocztowy, miasto _____

Mój klient:

*Uprawnienie: Polecenie nowego klienta musi koniecznie czasowo po poleceniu klienta w HGB AG lub Phalomed Ltd nadejść. Okres promocji rozpoczyna się 1 Listopada 2009 i kończy w dniu 31.12.2010 (zakończenie akcji) Przemysłowe klienci są wyłączone z udziału. Wysłania kuponu do stałego klienta odbywa się po terminie prawnego powrotu w nowym kliencie. Wpłaty gotówkowej w wysokości wartości bonu jest wykluczona.

mię _____

Numer rachunka _____

Moja prezerwatywa o wartości 38 € potrzebuję w rozmiarze (proszę zaznaczyć):

S = S kapturek z S kondomem

MS = M kapturek z S kondomem

M = M kapturek z M kondomem

LM = L kapturek z M kondomem

L = L kapturek z L kondomem

XL = XL kapturek z XL kondomem

Proszę wypisac i wyslac:

HGB
Marketing – Product Management
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Niemcy

Termin 31/12/2010