



PHALLO♂SAN®

DE	Gebrauchsanweisung
GB/US	Instructions for use
FR	Mode d'emploi
ES	Instrucciones de uso
IT	Istruzioni per l'uso
PT	Manual de instruções
BR	Manual de instruções
NL	Handboek voor gebruik
FI	Käyttöohje
PL	Instrukcja
HR	Uputstvo za upotrebu
CZ	Návod k použití
HU	Használati útmutató
BG	Инструкции за употреба
RO	Instrucțiuni de utilizare
RU	Инструкция по применению продукта
LT	Naudojimo instrukcija
TR	Kullanım kılavuzu
GR	Οδηγίες Χρήσης
CN	使用指南
JP	取扱説明書
AE	عليمات



Ambalaj İçeriği

1. Penisinizin başına bastırarak geçireceğiniz kaplı silikon yüzük
2. Kemer (3) ile istediğiniz ayara getirebileceğiniz kemer tokası
3. Belinize bağlayabileceğiniz elastik kemer
4. Vakum koruyucu prezervatifi sabitlemek için kullanacağınız nikel kullanılmadan yapılmış klips
5. Penisinizin üzerine geçireceğiniz 3 ayrı büyüklükteki streç prezervatif. Esneme anında hortum klips (4) ile hava almayacak şekilde kapatılır.
6. Penis başını kuvvetli çekimlerden korumak ve başarıya daha çabuk ulaşabilme için gerekli olan koruyucu kapak
7. Vakum oluşturmak için gerekli olan top şeklindeki pompa
8. Ölçüm şablonu
9. 3 adet cırtırtı (velcro)
10. Kancalı güvenlik ipi
11. Ürün tanıtım ve açıklaması DVD'si ve Televizyon filmi
12. Kullanım kılavuzu

Penis büyütme, Penis eğriliği ve deformasyonu tedavisi veya hafif ereksiyon problemlerinin tedavisi için klinik ortamda test edilmiş ve etkisi onaylanmıştır

Sayın müşterimiz, PHALLOSAN® alışverişiniz için teşekkür ederiz! PHALLOSAN®, çeşitli tedavi gerektirici durumlarda en uygun ürün olduğunu kanıtlamıştır.

Penis büyütme

insan vücudu yoğun bir talep olması halinde muhtemel yaralanma ve zorlanmalara karşı önlemini almak için yeni hücre üretme mekanizmasına sahiptir. Bu mekanizma ilk olarak doğrutusunda örneğin kulak-dudak- ve elbette penis büyütmede kullanıldı. Yıllarca çeşitli ağırlıkların bu organlara takılması sonucunda örneğin Hindaistan'daki kutsal Sadhu'lardaki veya kuzey Uganda'daki Karamojong'lardaki gibi bu metodların uygulandığı hedef organlarda yaklaşık olarak 45 cm.'ye varan bir uzama görülmüştür (bkz. Britannica Ansiklopedisi, Stern Nr. 49/95). Bu bilgiler yaklaşık olarak yüz yıldır Alman etnoloji ve antropoloji arşivlerinde bulunmakta idi. PHALLOSAN®'ın başarısının sebebi, bir mikro vakum vasıtası ile meydana getirdiği uzama ve genişlemeye dayalı çalışma prensibidir. Kemer taşıma esnasında penis üzerinde eşit olarak yayılan mekanik bir çekme uygulanır. Bu sürekli ve acısız olan çekme

sonucunda penis tabiri caiz ise vücuttan çekilme suretiyle vücut geliştirme sporunda olduğu gibi mikro liflerin (liflerin) yırtılması etkisine benzer bir etki uygular. Bunun sonucunda vücut, hücrelerini yenilemeye, ve bunları bahsettiğimiz bölgelere yerleştirmeye başlar (bir nevi rejenerasyon). Bu metodun uygulanması sonucunda penis, özellikle baş kısmında olmak üzere kalınlaşır, bir inceleme kesinlikle söz konusu değildir.

Klinik araştırma

2005'in Ocak ayında PHALLOSAN® hakkında, ve Frankfurt am Main Üniversitesi Markus Hastanesi Üroloji bölümü'nün şef doktoru Prof. Dr. med. Sohn'un gözetimi ve himayesinde klinik bir araştırma gerçekleştirildi. 6 ay süren bu çalışmada hastaların veri ve sonuçları Başhekim tarafından meydana çıkarılıp, değerlendirildi. Söz konusu araştırma çok büyük bir başarıyla noktalanmıştı. 6 aylık bu zaman dilimi içerisinde bütün hastalarda penis büyümesi ve kalınlaşması gözlemlenmişti! Bu sonuçlar, hastaların günlük taşıma ve kullanımları ile orantılı ve bağlantılı idi. Böylece PHALLOSAN® tarafızsız bir şekilde bir Alman kliniğinde denenip, olumlu sonuçlar elde edilen tek penis genişletme ve uzatma aletidir.

Retractio Penis

Retractio Penis, aşırı şişmanlık veyahut vücudun aşırı yağ bağlaması durumunda meydana gelen penisin derialtı yağ dokusuna doğru

geriye çekilmesi durumuna denir. Bu duruma karşı en iyi ve etkili "terapi metodu" elbette ki kilo verip, bu sayede bu durumu tersine çevirmekdir.

Kilo verme ile istenilen sonuç alınamaz ise, PHALLOSAN® vesilesi ile sürekli bir germe-uzatma metodu ile penisini içinde bulunduğu yağ dokusundan dışarıya doğru geri çekmek mümkündür. Yarım, belden aşağı veya kısmi felçlerde (Paraplegia) (ki bu kimselerde karın kasları felçli olanlar ve tekerlekli sandalyeye oturma pozisyonunda bağlı olanlarda bu fenomen daha kuvvetli ve etkili olarak görülmektedir) de PHALLOSAN®'in aynı şekilde uygulanması mümkündür, fakat şimdilik sadece sürekli felçlerde mümkündür.

Bunun sebebi ise kullanılan prezervatifin refleksi olarak altına işemeyi (istem dışı idrar kaçırma) emerek çekecek, yada Prezervatifin dışına çıkaracak bir sisteme sahip olmamasıdır.

Küçük penis (Penishypoplasia)

Küçük bir penisle doğmuş olan erkeklerde penisin Hypoplasia durumundan: eğer Penis vücudun büyüme ve gelişmesine rağmen küçük olarak kalmaya devam ediyorsa (ki bu ereksiyon durumunda 11 ila 12 cm arasındadır) söz etmek mümkündür. PHALLOSAN® sayesinde sürekli olarak uygulanan penisini çekme ve germeler sayesinde, bir büyüme ve gelişme sağlanabilir. Penis, bu sürekli uygulanan baskı altında gençlik olarak da büyüme ve gelişme gösterir.

Küçük algılanan veya hissedilen Penis (sübjektif hissedilen Penishypoplasia)

Hangi şart altında olursa olsun, sübjektif olarak penisinin küçük veya kısa olduğu kanısında olan erkekleri kesinlikle önemsememezlik yapılmamalı ve kesinlikle kendilerine alaycı, hafif tebessüm edilmemelidir. Bu kişiler, toplumun her statüsünden ve herhangi bir eğitim seviyesinden geliyor olabilirler. Aslında penisleri ereksiyon halinde iken ortalama değerlere eş ise de, bu kişiler ruhsal olarak penislerinin küçük olduğu yanılgısı içindedirler. Bu kişiler, iş arkadaşlarının ve duş veya saunada iken arkadaşlarının aşağılayıcı bakışlarından korkarlar. Erkeklerde penisleri hakkında kompleksler ve aşağılık hissi yaşarlar. Bu durum, birçok erkeğin hissettiği bir durumdur. Erekte olmadan büyük bir penise sahip olan erkekler, güç, kuvvet ve seksüel kudretin simgesidirler. Sübjektif olarak algılanan Penishypoplasia, yani penisin küçük olduğu algısı genellikle çocukluk yılları ve okul döneminde başlar ve vatani görev esnasında, sporda, saunada vb. yerlerdeki yaşanan olaylarla iyice pekişir.

Ereksiyon problemleri (hafif derecede sertleşme sorunu)

PHALLOSAN® 'in kullanımında pozitif bir yan etki olarak birkaç örnekte olmak üzere ereksiyon sorunlarında azalma ve hafifleme, penis başında his ve duyarlılıkta ilerleme ve gelişmeler ve bunlarla birlikte cinsel ilişki esnasında daha fazla duyarlılık ve istek artışı rapor edilmiştir. PHALLOSAN®'in kullanımı esna-

sında penis gerilerek, penisteki kan dolaşımı artırılır. Birçok kullanıcı, PHALLOSAN®'i ileri yaşlarda Anti-Aging terapisi (yaşlılığa karşı terapi veya geriye yaşlanma) olarak kullanmaktadır, bu yöntem "*penis için bodybuilding yani vücut geliştirme*" olarak da tanımlanmıştır.

Prostat kanserine karşı hormon tedavisi sonrası destekleyici olarak kullanımı.

Prostat kanseri tedavisinde, kullanılan hormonlardan dolayı peniste bir küçülme (Retraction) yaşanır. Bu oluşan küçülme, Viagra (Sildenafil) kullanımı ile veya SKAT adı verilen erektil cinsel organa (penis) yapılan iğneler ile tedavi edilmeye çalışılır, fakat normale oranla sürekli olarak aynı etkiyi gösteremez. Prostata'nın radikal olarak tamamen alınması bile genellikle görülen ve belirli sebeplerin sonucunda oluşan ereksiyon problemlerine ve peniste önemli derecede bir küçülmeye sebep olur. Bu sebepten ötürü bazı ürologlar tedavide Viagra veya iğne tedavisine (SKAT) başvurmaktadır. PHALLOSAN® , prostat kanseri olan hastalara ameliyat sonrasında oluşan bu penisteki küçülmelere karşı olan mücadelelerinde bütçeye uygun bir şekilde yardım sağlar.

Penis deformasyonu (penisin düzgün olmaması)

Deformasyon denilince akla gelen sözkonusu organın düzgün olmaması (şeklinde deformasyon olması) yani bükük, yamuk veya

çekilmiş olmasıdır. Bu deformasyonlar, belli bir dereceye kadar sadece estetik olarak rahatsız edici olmakla beraber, cinsel ilişkinin sancılı olmasından, cinsel ilişkiyi imkansız kilmaya kadar gidebilirler. Bu deformasyonlar ya doğuştan itibaren vardır, yada sonradan ortaya çıkar. Örneğin peniste idrar kanalındaki bir yaralanmadan sonra. Bu tür deformasyonlar şimdiye kadar operasyonlarla düzeltiliyordu. Fakat bu operasyonlar, peniste 3 ila 5 cm kadar bir küçülmeyi de beraberinde getiriyordu. Bir ameliyatta erektil cinsel organın uzun olan tarafı "daraltılmak" suretiyle veya dokunun fazla olan kısmı kesilip, erektil cinsel organın kısa olan kısmına uyacak bir biçimde eklenir, ve böylece penis düzeltilmiş olur. Fakat optik olarak penis, bu ameliyatın sonrasında pek hoş gözükmez.

Peniste oval şekilde katlaşmalar ve kabartılar (beze türü), yer yer ağırlı deformasyonlar (Induratio penis plastica, IPP)

Bu hastalıkta söz konusu olan; az yada çok olmak üzere peniste oval, yuvarlağımsı şekilde sertleşmiş bir dokunun varlığıdır. Bilimsel olarak bu oluşumun sebebi açıklanamamıştır. Sadece bilinen bir nokta, bazı hasta gruplarının ISS'ye daha yatkın olduğudur. Örneğin, bu grupta diyabetik (Şeker hastalığı) olan kişilerin bu hastalığa daha yatkın olmaları gibi. Bu sertleşmeler (Plaklar), penisin acılı bir şekilde çekilmesine sebep olur, ki bu cinsel ilişkiyi çekilmesine hale getirebilir veya tamamen engelleyebilir. İlaç ile olsun, röntgen ışınla-

masıyla yapılan tedaviler, yada elektromekanik dalgalar ile denenen tedaviler olsun sadece acıyı belirli bir süre dindirmeye veya geçici birtakım etkiler gösterirler. Sonuçta, sorunu giderici olmaktan ziyade bir süreliğine dindirici etkileri vardır. Sonuçta elde kalan tek yöntem ameliyat vesilesi ile bu plakların kesilip, deforme olan veya düzgün olmayan bölgelere der nakli veya suni deri naklidir. Bu yöntem, yakın gelecek için de tek terapi imkanı olarak kalmaya devam edecektir. Fakat bu yapılan düzeltmeler, birçok hastada alınan parçanın büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte ereksiyon yetisinin kısmen yada tamamen kaybına sebep olur. Bu da bir penis protezi zorunluluğunu beraberinde getirir. Bu sertleşmelere karşı PHALLOSAN® elbette çözüm değildir, ki bir ameliyat da çözüm değildir. Fakat PHALLOSAN® yardımı ile penis düzeltilebilir. Erektile cinsel organa uygulanan sürekli çekim vasıtasıyla yeni bağ doku oluşumu hızlandırılır ve tetiklenir.

Penisin hangi yönde bükük olduğu etkin bir rol oynamaksızın, PHALLOSAN® penisini düzgün olan normal haline çeker. Bu esnada deforme olan bölgeye de en büyük gerilim uygulanır, bu yüzden sözkonusu bölgede acısız bir şekilde meydana gelen ve vücudun içlerini yeni hücreler yerleştirdiği mikro lif yırtıklarının sayısı artar. Prof. Dr. med. Jehle'nin yaptığı bir araştırmada hastalarından biri 61 yaşında, ve penisinde 90 derece bükümle bulunmakta idi. Yaklaşık olarak 9 ay sonra bükülmeden neredeyse eser kalmamıştı ve


hasta yaklaşık olarak 12 hafta sonrasında cinsel ilişki yaşadığını bildirmiştir. PHALLOSAN® ile yapılan yukarıda bahsedilen bu başarılı terapi bugün bile, yani 6 yıl sonra bile başarısını muhafaza edebilmiştir. PHALLOSAN® ile yapılacak bir terapi denemisi, her seferinde ameliyat öncesi alternatif bir deneme olarak tavsiye edilir. PHALLOSAN®'in özellikle başka terapi imkanlarına engel yada bir şekilde olumsuz bir etki yapmadığı gerçeğini göz önünde bulundurmak gereklidir. Yukarıda bahsedilen örnekte olduğu gibi, PHALLOSAN®'in penis deformasyonundaki başarısı görülmektedir. Arzu etmeniz halinde size memnuniyetle doktor raporunu gönderebiliriz. Veya internet sitemizde www.phallosan.com/tr üzerinde "Kullanım" sonra da "Peniste oval şekilde katılaşmalar" üzerinde "Kliniksel ispat: Penis deformasyonunun başarılı bir şekilde terapisi" sekmesinde bulabilirsiniz.



Hazırlık:


Lütfen bütün PHALLOSAN® parçalarını önünüzde yayın. Kemer ve kemer tokası (2) ile PHALLOSAN®'i en büyük ölçüye getirip belinize dolayın. Kemerli kaplı silikon yüzük (1) ve klip (4) göbekten hafif bir gerginlik, bir gerilime görünceye kadar sıkın. Sonra kemeri tekrar çözün. Lütfen bu esnada streç prezervatif (esnek prezervatif) lerin ambalajlarını açma-

yın! Lütfen talimatları adım adım uygulayın. Sadece orijinal ambalajında açılmamış streç prezervatifler size uygun ölçülerde olanlar ile değiştirilip, geri iade edilebilir. Posta masrafları tüketiciye aittir. Açılmış, ambalajsız streç prezervatifler bir daha piyasaya sürülemediğinden, geri alınmazlar. Streç prezervatifi takip çıkarırken lastik dolanmak suretiyle penis etrafındaki kısımlarda oluşabilecek zedelenme ve tahriş önleyebilmek için, penis çevresindeki tüyleri ve kılları düzenli olarak almanız önerilir. Bunun için marketlerde satılan tüy dökücü kremleri kullanabilirsiniz.


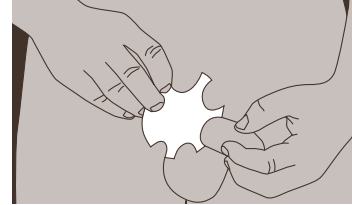



1. Ürün ile birlikte yollanmış olan şablon sayesinde size uygun prezervatifi ve ölçüsünü tespit edebilirsiniz. Erekte olmamış penisinizi baz alarak baş ve sap kısımlarını ölçün.

2. Tavsiyemiz, ilk kullanımdan önce başlıkların birbirlerine yapışmalarını önlemek amacı ile üretim aşamasında pudralanan koruyucu kapagini yıkamanızdır.

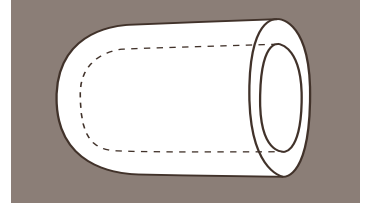


3. Resimlerde görüldüğü olduğu gibi koruyucu başlığı penisinizin üzerine geçirin. Penisin üstündeki derinin (sünnetsiz kişilerde) penis başında olup olmaması, veya önceden sizin tarafınızdan griye çekilmiş olması arasında bir fark yoktur.

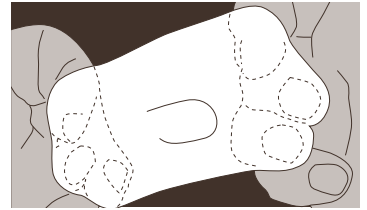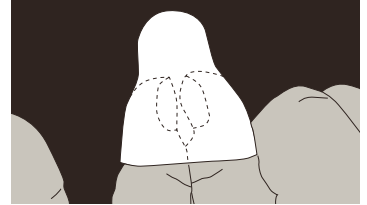

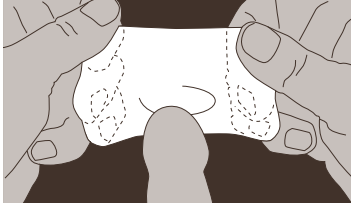


4. Penis başında hava boşluğu bulunmamasına dikkat edin. Korumayı başlık, penisinizi olası kuvvetli çekimlerden korumak ve bunlardan dolayı oluşabilecek yan etkilerden korumak için tasarlanmıştır ve cildinize hemen uyum sağlar. Kesinlikle rahatsız etmez, yumuşaktır. Şimdi streç prezervatifi uyun olan ölçüsüne göre seçip ambalajından çıkarabilirsiniz. Geriye kaan 2 Prezervatifi posta ücretleri ile Firmamıza yollayın. Size penisinizle aynı ölçüdeki 2 prezervatifle değiştirip size geri yollayalım. Ara ölçüler şu anda hazırlık aşamasında. Örneğin "L"-başlık ölçüsüne sahip "M"-prezervatif gibi. **Merhem yada krem kullanmayın, zira bu ürünler streç prezervatifi ömrünü, deri üzerinde durma yetisini ve kalitesini azaltır.**

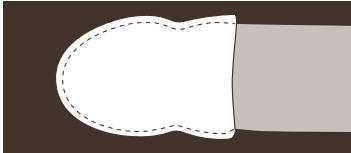


5. Şimdi streç prezervatifi kullanımı konusunda birkaç teknik özelliğe dikkatinizi çek-

mek istiyoruz. Lütfen basit şekliyle bir çekim başlığı ve bir contadan bahsedildiğini unutmayın. Bu sebepten dolayı önemli olan prezervatifi penise ne kadar sarıldığı veya ne kadar uzun olduğu değildir. Prezervatif, oluşan kuvveti penis üzerine aktarmak için dizayn edilmemiştir. Kuvvetin aktarımında rol oynayan, başlıkta oluşan vakumdur. Prezervatif, sadece penisin başlangıcı ile çekim başlığı arasına sabitleyici bir görev üstlenmektedir. El pompasını (havayı çekmek için) streç prezervatif ile birleştirin. Şimdi, önceden hazırlanmış olan streç prezervatifi elinize alın. Sokarken, penisinizin başının başlığa aşağı yukarı yarıya kadar girmesine özen gösterin. Şimdi prezervatifi penis başlangıcına (sap kısmı) kadar yuvarlayarak indirebilirsiniz. Sonra el pompası (havayı çekmek için) vasıtasıyla penis başını tamamen başlığın içine girene kadar havayı çekin. Bununla birlikte sıkılaştıran prezervatif çekmenin etkisiyle başlığa biraz girecektir, birlikte çekilecektir.

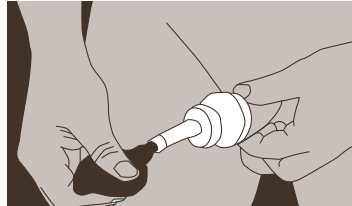



6. Şimdi penis, başlığın içine çekildi. Pompa yordamı ile havayı çekmeye devam ederken bir yandan da streç prezervatifi penisin baş-

langıcına kadar geçirin (tamamen penisin başladığı yere kadar çekin).

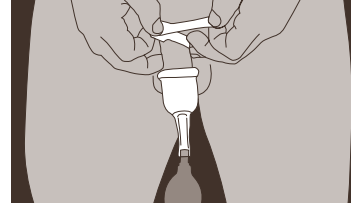


Eğer prezervatif penise gevşek geliyorsa veya kırışıklıklara sebep oluyorsa, penise boğmadan manşeti yumuşak tarafla içe getirin. Manşetin görevi, streç dolayısıyla oluşması muhtemel kırışıklıkları düzeltmektir. Tabii ki prezervatif, penisin başlangıcına düzgün bir şekilde oturuyorsa manşete gereksiniminiz yoktur.


7. Çekim için kullandığınız ve prezervatifi içine geçirmiş olan pompayı bırakabilirsiniz. Streç kemerini takmaya başlayın. Bu kemer, prezervatifi penise sıkı bir biçimde çeker.

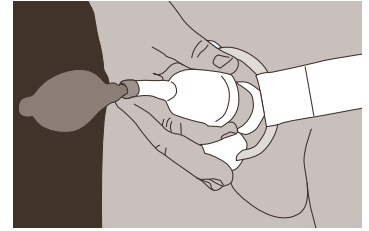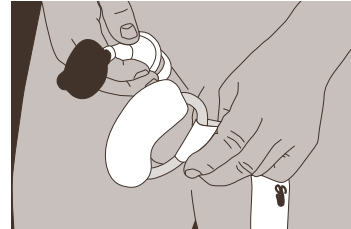


8. Kemerin öbür tarafında bulunan metal klipsi açın. Kemerin ayarını olabildiğince en yüksek dereceye kadar genişletin. Şimdi ise, prezervatifi hortumunun sonunu normal balonlarda yapıldığı gibi hava girmemesi için üstüne bastırın. Bu esnada pompayı uzaklaştırarak, streç prezervatifi klips ile birleştirin. Klipsi, streç prezervatifi hortumuna ortadan sabitlediğimize emin olun.

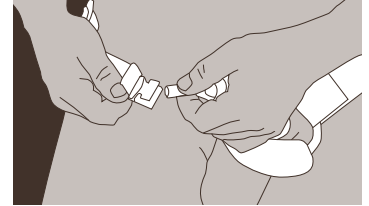

9. Streç kemeri sıkarken kasık ve bel arasında olmasına dikkat edin. Şimdi kemerinizi arkadan çekin ki kemer, kalçalarınızdan belinize doğru gelsin. Eğer kemeri kuyruk sokumu hizasında taktıysanız, otururken bir çekmenin ortaya çıkması ihtimali vardır ki bu rahatsız edici olabilir.

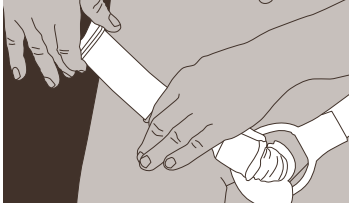

Güvenlik iplerini ,oturma esnasında klipsin arkaya olası bir kayma yapmasını önlemek için, uçlarından birbirine sıkmadan bağlayın.

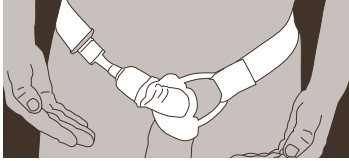

Bakım:

Prezervatif, kesinlikle başlık tarafından çekilmiş olmamalıdır ve hijyenik şartlardan dolayı ılık suda sabun ile yıkanmalıdır. Yıkamadan önce yeşil sünger çıkartın ve bu parçayı lütfen ayrı yıkayın.



Lütfen yıkama ve kurulumla işlemleri bittikten sonra kullandığınız prezervatifi özellikle spor mağazalarından temin edebileceğiniz talk pudrasıyla pudralamayın unutmayın. Lütfen bebek pudrası kullanmayın, zira bebek pudrasında, içinde yağ ihtiva eden Anilin bulunmaktadır.

Prezervatifinizi yuvarlamadan veya katlamadan saklayın. Prezervatifi, bir sonraki kullanımdan sonra yuvarlayabilirsiniz. Prezer-

vatifin yanlarının birbirine yapışmasını ve elastikliğini kaybetmesini önlemiş olursunuz.

Prezervatifi şöyle geri yuvarlayabilirsiniz:

Prezervatifi yuvarlanmamış haliyle dış tarafını talk pudrasıyla pudralayın. Hortumumsu bitiş kısmını dizlerinizin arasına alın. Şimdi iki elinizi de serbest bırakabilirsiniz. İçeki başlığın kenarlarının arkasına kadar prezervatifi yuvarlayın.

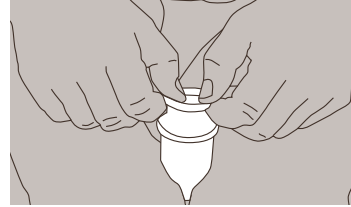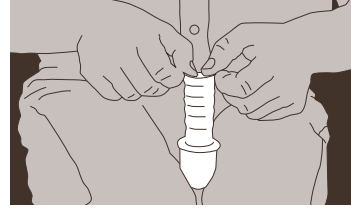

Lütfen dikkatli olun ve prezervatife zarar vermemeye veya sivri tırnaklar vb. yüzünden delmemeye özen gösterin.

Penisin bağ dokusunun, oluşan basınca tamamen ayak uydurabilmesi için gerekli aşamalı plan.

Önsöz:

Bağ doku, kalıtsal olarak aktarılır ve bu yüzden insandan insana çok büyük farklar gösterebilir. Tıbbi açıdan çekim ve çekme kuvvetlerini birim olarak gram yada kilogram olarak nitelendirmek sorumsuzluk olur. Bu sebepten dolayı, sizin için aşamalı bir plan hazırladık. Bu plan, sizin kemeriniz üzerine düşen basıncı, ağ dokunuza uygun bir şekilde dağıtır ve yayar. Böylece penis büyütme ve genişletme konusunda, negatif yan etkiler görülmezsizin en uygun sonuçları elde etme imkanına sahip olacaksınız.

1. Gün:

Lütfen kemerinizi çok sıkı olmamak koşulu ile (kemerin sıklığı, sizin hissiyatınıza bağlıdır) 1 saat taşıyın. Kemerinizi açın ve prezervatifi

çıkartın. Şimdi ise, penisinizin ucundaki idrar atma kanalına deliğine ve penisinizin baş kısmını (sünnetsiz kişiler için: sünnet derisi) inceleyin. Bu kısım, penisin en duyarlı ve hassas olduğu bağ doku kısmıdır. Burasının kızarıp kızarmadığını, veya zarar görüp görmediğini kontrol edin; eğer bunlardan herhangi birisi var ise bu, kemerin uyguladığı basınca fazla olduğu anlamına gelir. Herhangi bir iz veya kızarıklık yok ise, kemerin bu kısmını işaretleyin. Lütfen bugün için uygulamayı sona erdirin.

2. gün:

Evvelki gün kızartı tespit etmiş olan hastalar için: Kemerinizi bu sefer sıkı olmamak şartı ile (geçen sefere oranla biraz daha serbest) 1 Saat boyunca takın. Bu 1 Saatin sonunda, tekrar penisinizi inceleyin. penisinizin ucundaki idrar atma kanalına deliğine ve penisinizin baş kısmını (sünnetsiz kişiler için: sünnet derisi) inceleyin. Bu kısım, penisin en duyarlı ve hassas olduğu bağ doku kısmıdır. Burasının kızarıp kızarmadığını, veya zarar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer bu sefer de kızartı ve herhangi bir kabartı tespit ettiyeniz bu, kemeri yine fazla sıkıtiğiz anlamına gelir. Bugün için terapiyi bitirin.

Evvelki gün kızartı veya kabartı tespit edememiş olan hastalar için: Bugün için kemerinizi 2 saat süresince kullanın. Eğer bu sefer de kızartı tespit edemediyeniz, bir sonraki gün uygulamayı 1 saat daha fazla uygulayın (3 saat).

3. günden 8. güne kadarki süre:

Kızartı tespit etmiş ve edememiş hastalar veya ilk gün kabartı tespit etmiş olan hastalar için: Şayet kemerinizi 2. gün de hiçbir kızartı veya kabartı tespit edemediyse, 3. günde kemeri 3 saat boyunca takın. Şayet bu 3 saatin sonunda kızartı veya kabartı tespit edecek olursanız, kemeri biraz bollaştırın ve ke-
meri bir sonraki gün tekrar 3 saat boyunca takın. Bu süre sonunda herhangi bir kızartı veya kabartı tespit edemeyecek olursanız, kemeri hergün boyunca 1 saat daha fazla taşıyın. Ertesi gün penisinizin idrar atma deliği ile penisinizin baş kısmını (sünnetsiz kişiler için: sünnet derisi) arasında bir kızırtı yada kabartı var ise kemeri biraz bollaştırın ve bu noktayı bir kalemlerle işaretleyin ve ertesi gün kemeri biraz bollaştırıp, öyle takın. Lütfen yeşil süngerin penisinizin baş kısmına temas etmesine ve dayanmasına özen gösterin. Lütfen bu aşamalı plana uyun.

PHALLOSAN®'i, kendisinden çok memnun kalarak ve seveerek taşıyacaksınız. Penisiniz birkaç ay sonra boy ve kalınlık olarak ölçülebilir olumlu sonuçlar gösterecektir.

Göreceğiniz ve hissedeceğinizi etkilerve sonuçlar, erken boşalma yaşamadan sadece daha kuvvetli cinsel dürtü, istek gibi pozitif olacaktır. Buna sebep, PHALLOSAN®'in kullanımı ile birlikte penis-
teki kan dolaşımının daha fazla ve kuvvetli olmasıdır. Bu durum tüm dokular ve sinir uçları üzerinde pozitif bir etki yaratır. PHALLOSAN® ile başarılar dileriz!

Kullanım süresi:

PHALLOSAN®'ünde 8 ila 10 saat arası kullanılmaktadır, fakat arzu ederseniz daha da uzun süreli kullanabilirsiniz! Lütfen her 3-4 saatte bir 5 dakikalık bir mola süresi koymayı, streç prezervatifi çıkarıp penise 1 dakika boyunca masaj yapmayı ihmal etmeyin. Aşağı yukarı 8 gün sonra, buna gerek duma-yacaksınız. Unutmayın ki; ne kadar sık ve çok kullanacak olursanız, o denli başarı elde edeceksiniz! Birçok kullanıcı, Phallosan®'i günde 12 saate kadar kullanmış ve kullanım süresine göre sonuç almıştır. Streç prezervatif, hijyenik sebeplerden ötürü (bakteriyel enfeksiyon riski) sabun ile ılık suda yıkanmalıdır.

Phallosan® 'ı gece de kullanabilirsiniz, zira streç prezervatif, gece siz uykuda iken olası bir ereksiyonda esner ve genişler.

Yan Etkileri, Önlem ve Tedavileri

PHALLOSAN®'in kullanımından, kişinin kendisi mesuldür fakat, Kullanma talimatına uyulduğu sürece bir sorun çıkması düşünülemez. Buna rağmen, özellikle kullanıma başlanılan ilk haftalarda penise kuvvetli bir çekim uygulanmamalıdır. Dokunuzu PHALLOSAN®'a alıştırmın ve kemeri (3) başlangıçta hafif bir çekim yaratılacak şekilde ayarlayın. Başlangıçta penisinizi saatte bir kızarıklık (ki bu kan dolaşımında bir sorun olduğunun bir göstergesidir) ve kabartılara karşı kontrol edin. Özellikle penisin idrar atma noktasına yakın yerlerde renk değişimi meydana geliyor

ise, lütfen hemen kemerinizi (3) gevşetin ve penisinizi kan dolaşım sorunlarına ve kabartılara karşı inceleyin. Kabartı ve baloncuklanma gibi belirtilerden birisi veya ikisini penisinizde tespit edecek olursanız, kemer (3) çok sıkı demektir. Yukarıda bahsedilen kabartı veya baloncuklar geçene kadar mutlaka ara verin. Sonrasında, çekim gücünü biraz daha hafif olacak şekilde ayarlayın. Lütfen biraz sabırlı olun. Zira penis büyüme işlemindeki başarı oranı, çene kaymasının başarılı tedavisi ile aynı orandadır. Germe ve uzatma kuvvetinin sürekliliği de çekim kuvveti kadar başarıda önemli bir rol oynar!

Aşağıda sayılan durumlardan birisinde PHALLOSAN®'i kullanmanız önerilmez:

Alkol sonrasında, uyuşturucu madde veya ağrı kesici ilaçların akabinde, uyku ilacı ve sakinleştirici kullanımı sonrasında, ki bunlar meydana gelebilecek ağrıları hissedememeye sebep olabilirler.

Penisteki yaralanma veya enfeksiyon durumlarında da PHALLOSAN®'i kullanmayın. Doku veya damar zayıflığı durumunda da PHALLOSAN®'i kullanmayın.

Penis büyümesini tam olarak nasıl ölçebilirim?

Bunun için lütfen bir mezura kullanın. Erekte olmamış haliyle penisinizi vücudunuza 90derece açı yapacak konumda tutun. Penisinizin yanına mezurayı yaklaştırıp, kasık kemiğinize dayayın. Böylece, penisinizin

boyunu ölçebilirsiniz. Aynı metodu penisiniz erekte iken ölçmek istiyorsanız uygulayın.

Önemli: kullanıma başlarken vücut ağırlığını-zı çıplak halde ölçün. Olası bir kilo alma durumunda müstehcen bölgede penis etrafındaki kıllı bölge yağ bağlar. Bu durum, penis başı ile kasık kemiği arasında daha kısa gösterecek bir yanlış durumu yaratabilir. Buna suprapubik yağ dokusu da denir.

PHALLOSAN®'in tüm parçaları sonradan sipariş edilebilir. Uzmanlarımız, her türden soru ve istekleriniz için normal telefon ücreti karşılığında size tahsis edilmişlerdir.

Teknik değişikliklerin hakkı firmamızdadır. www.phallosan.tr

Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki:

HGB AG
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Almanya

Tel.: +49 81 77 93 16 10
Faks: +49 81 77 93 16 20

Elektronik Posta adresi: info@hgbag.com
Phalomed, 11.2009

Arkadařlarınızı PHALLOSAN® müşteri si yapın, kârlı ıkın.

PHALLOSAN®'ı arkadaşlarını za tavsiye etmeniz, sizin için kazançlı olacaktır. Sizin üzerinizden (bizim müşteri miz olan bir kimsenin üzerinden) gelen her yeni müşteri tabiiki bunu telefonda, internet üzerinden ya da yazılı bir şekilde bildirdiđi takdirde ve bu kiři müşteri veri tabanımızda kayıtlı ve bir müşteri kayıt no'suna sahip ise, bizden € 43,- deđerinde bir hediye çeki ve posta masrafları dâhil kendi ölçüsünde bir prezervatife sahip olmaya hak kazanır.

Ben mevcut PHALLOSAN® müşteri siyim ve başka bir kiři yi PHALLOSAN®'ı kullanmaya, faydalarını ve başarısını gösterip, onu PHALLOSAN® kullanmaya ikna ettim.

Makbuz no. _____

isim _____

Sokak adresi, ev no _____

Posta kodu ve şehir (ülke adı) _____

Reklam vasıtasıyla size gönderdiğim müşteri:

*Katılım koşulları: Yeni müşteri nin sipariři, zorunlu olarak tavsiye eden müşteri nin siparişinden sonra gelmelidir, HGB AG yahut Phalomed Ltd.'e yapılan siparişler arasında uzun zaman geçmemiş olması gerekmektedir. Kampanya 1 Kasım 2009 tarihinden itibaren geçerli olup, 31.12.2010 tarihine kadar geçerlidir. Mesleki müşterilerimiz bu kampanyanın dışındadırlar. Hediye çekinin sahibine yollanması, yollanmış olduđu müşteri nin geri iade tarihinin dolumundan sonradır. Hediye çeki nakit olarak talep edilemez ve nakit olarak deđiştirilemez.

isim _____

Makbuz no. _____

38 € deđerindeki streç prezervatifi mi şu ölçüde istiyorum (lütfe n çarpı ile işaretleysin):

S = S Başlık ile S Prezervatif

MS = M Başlık ile S Prezervatif

M = M Başlık ile M Prezervatif

LM = L Başlık ile M Prezervatif

L = L Başlık ile L Prezervatif

XL = XL Başlık ile XL Prezervatif

Lütfe n doldurup, ařađıdaki adrese yollayın:

**HGB
Marketing – Product Management
Am Wallgraben 18
DE-82541 Münsing
Almanya**