



# PHALLO♂SAN®

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| DE    | Gebrauchsanweisung                |
| GB/US | Instructions for use              |
| FR    | Mode d'emploi                     |
| ES    | Instrucciones de uso              |
| IT    | Istruzioni per l'uso              |
| PT    | Manual de instruções              |
| BR    | Manual de instruções              |
| NL    | Handboek voor gebruik             |
| FI    | Käyttöohje                        |
| PL    | Instrukcja                        |
| HR    | Uputstvo za upotrebu              |
| CZ    | Návod k použití                   |
| HU    | Használati útmutató               |
| BG    | Инструкции за употреба            |
| RO    | Instrucțiuni de utilizare         |
| RU    | Инструкция по применению продукта |
| LT    | Naudojimo instrukcija             |
| TR    | Kullanım kılavuzu                 |
| GR    | Οδηγίες Χρήσης                    |
| CN    | 使用指南                              |
| JP    | 取扱説明書                             |
| AE    | عليمات                            |



#### Περιέχει:

1. Δαχτυλίδι από σιλικόνη, στο οποίο εφαρμόζει το πέος.
2. Αγκράφα ζώνης, με την οποία η ζώνη (3) μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα μεγέθη.
3. Ελαστική ζώνη, που δένεται γύρω από τη μέση.
4. Μεταλλικό συνδετήρα χωρίς νικέλιο, με τον οποίο στερεώνεται το προφυλακτικό κενού αέρος.
5. Ελαστικό προφυλακτικό σε 3 μεγέθη, το οποίο καλύπτει το πέος. Καθώς τεντώνεται το ελαστικό εφαρμόζει αεροστεγώς με τον συνδετήρα (4).
6. ροστατευτικό κάλυμμα για τη βάλανο, για να την προστατεύει σε περίπτωση δυνατής έλξης, για ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
7. Τρόμπα, για τη δημιουργία κενού αέρος.
8. Πατρών για τη μέτρηση του μεγέθους.
9. 3 σκρατς
10. Σκοινί ασφαλείας με γάντζο
11. DVD με την περιγραφή του προϊόντος και τηλεοπτικό σποτ
12. Οδηγίες χρήσης.

Με κλινικά αποδεδειγμένη επιτυχία στη μεγέθυνση και ευθυγράμμιση πέους, καθώς και για την αντιμετώπιση ελαφράς στυτικής δυσλειτουργίας χωρίς ενγείριση.

**Αγαπητέ πελάτη,**  
συγχαρητήρια για την αγορά του PHALLOSAN®! Το PHALLOSAN® έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για διάφορες περιπτώσεις.

#### Μεγέθυνση πέους

Ο ανθρῶπινος οργανισμός διαθέτει έναν μηχανισμό, ο οποίος σε περίπτωση άσκησης πίεσης είναι σε θέση να δημιουργήσει νέα κύτταρα με στόχο την πρόληψη πιθανού τραυματισμού ή επιβάρυνσής του. Τον μηχανισμό αυτό ανακάλυψαν πρώτοι κάποιοι πρωτόγονοι λαοί και τον χρησιμοποίησαν για πολιτιστικούς και θρησκευτικούς σκοπούς στους λοβούς των αυτιών και φυσικά στη μεγέθυνση πέους. Τοποθετώντας βαρίδια για πολλά χρόνια οι λεγόμενοι ιεροί Sadhus στην Ινδία και οι Karaojong στην βόρεια Ουγκάντα μεγάλωναν το πέος τους φτάνοντας μέχρι και τα 45 εκατοστά (βλ. Εγκυκλοπαίδεια Britannica Αρ. 49/95.) Σχεδόν για έναν αιώνα αυτή η γνώση βρισκόταν σε ανθρωπολογικά και εθνολογικά αρχεία στη Γερμανία. Η επιτυχία του PHALLOSAN® βασίζεται στην αρχή της άσκησης ελαφράς δύναμης με ένα μικρό κενό αέρος. Καθώς κανείς φοράει τη ζώνη ασκείται στο πέος μια σταθερή μηχανική δύναμη. Με αυτό το συνεχές τέντωμα, το οποίο δεν προκαλεί πόνο, το ανδρικό μόριο επιμηκύνεται,

όπως και στο Bodybuilding, και δημιουργούνται μικρές ρήξεις ινών, τις οποίες ο οργανισμός αναπληρώνει με νέα κύτταρα. Κατ' αυτόν τον τρόπο το πέος επιμηκύνεται, μεγαλώνει σε διάμετρο κυρίως στη βάλανο και σε καμία περίπτωση δεν μικραίνει το πάχος του.

#### Κλινική μελέτη

Τον Ιανουάριο του 2005 πραγματοποιήθηκε μια κλινική μελέτη σχετικά με το PHALLOSAN® υπό την αιγίδα του καθηγητή Dr. med. Sohn, διευθυντή της ουρολογικής κλινικής στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του πανεπιστημίου Γκαίτε στη Φρανκφούρτη. Τα στοιχεία των ασθενών και τα αποτελέσματα της έρευνας που κράτησε 6 μήνες δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον διευθυντή. Η έρευνα στεφθηκε από μεγάλη επιτυχία. Όλοι οι ασθενείς πέτυχαν αύξηση τόσο του μήκους όσο και του πάχους του πέους τους σε αυτό το χρονικό διάστημα! Τα αποτελέσματα βρίσκονταν σε άμεση συνάρτηση με τον καθημερινό χρόνο χρήσης του προϊόντος. Η αξιολόγηση δημοσιεύθηκε στο διεθνές ουρολογικό συνέδριο στην Αθήνα. Το PHALLOSAN® είναι, συνεπώς, το μόνο μέσο για την επιμήκυνση πέους, το οποίο αξιολογήθηκε θετικά με τρόπο αντικειμενικό σε μια γερμανική κλινική.

#### Retractio Penis

Υπό τον όρο Retractio Penis περιγράφεται η κατάσταση στην οποία το ανδρικό μόριο, εξαιτίας παχυσαρκίας, αποσύρεται στον υποδόριο λιπαρό ιστό. Σ' αυτήν την περίπτωση η καλύτερη θεραπεία είναι φυσικά η απώλεια βάρους.

Εάν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, υπάρχει η δυνατότητα με τη συνεχή χρήση του PHALLOSAN® να τραβηχτεί το ανδρικό μόριο έξω από τον ιστό του λίπους. Στην περίπτωση παραπληγικών, στους οποίους αυτό το φαινόμενο επιτείνεται από την παράλυση των κοιλιακών μυών καθώς και από την καθιστική στάση στο αναπηρικό καροτσάκι, είναι δυνατή η χρήση του PHALLOSAN®, αλλά μόνο στην περίπτωση όσων πάσχουν μόνο από παραλυσία και όχι από συνακόλουθη ακράτεια, καθώς δεν υπάρχει ακόμη προφυλακτικό, το οποίο θα δίνει συγχρόνως τη δυνατότητα για συγκέντρωση ούρων σε κάποιο χωριστό σημείο.

#### **Μικρό πέος (Υποπλασία του πέους)**

Η περίπτωση των ανδρών, οι οποίοι από τη φύση τους έχουν μικρό πέος χαρακτηρίζεται ως υποπλασία πέους, σε περίπτωση που αυτό ακόμα και σε στύση παραμένει μικρό (μικρότερο από 11–12 εκατοστά). Με τη χρήση του PHALLOSAN® μέσω μιας συνεχούς άσκησης δύναμης στο ανδρικό μόριο επιτυγχάνεται η μεγέθυνσή του. Η ειδική αυτή διαδικασία που περιλαμβάνει την άσκηση πίεσης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση όχι μόνο του μήκους αλλά και του πάχους του πέους.

#### **Υποκειμενική υποπλασία πέους**

Σε καμία περίπτωση δεν είναι σκόπιμο κανείς να ανγοι ή ακόμα και να χλευάζει τους άντρες, στους οποίους κυριαρχεί απλώς το υποκειμενικό συναίσθημα ότι το πέος τους είναι μικρό. Οι άντρες αυτοί ανήκουν σε όλα τα κοινωνικά

στρώματα ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου. Πρώτι το πέος τους σε στύση βρίσκεται μέσα στα όρια του θεωρούμενου ως φυσιολογικού μεγέθους, οι άντρες αυτοί υποφέρουν ψυχικά εξαιτίας του υποτιθέμενα μικρού τους πέους. Φοβούνται το υποτιμητικό βλέμμα των συναδέλφων και των φίλων τους στο ντους ή τη σάουνα. Οι άντρες δίνουν αξία στο πέος τους και πολλοί θεωρούν πως ένα μεγάλο πέος, ακόμα και όταν δεν είναι σε στύση, θεωρείται δείγμα δύναμης και σεξουαλικής ικανότητας. Η υποκειμενική υποπλασία πέους ξεκινάει ήδη από την παιδική ή τη σχολική ηλικία και εκδηλώνεται αργότερα μέσα από βιώματα στον στρατό, τον αθλητισμό, τη σάουνα κλπ.

#### **Στυτική δυσλειτουργία (μικρού βαθμού διαταραχή στύσης)**

Σε κάποιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ως θετικό αποτέλεσμα της χρήσης του PHALLOSAN® και η βελτιωμένη στυτική ικανότητα καθώς και η αύξηση της αισθαντικότητας κυρίως στη βάλανο, καθώς και αυξημένη διάθεση για σεξουαλική επαφή. Η χρήση του PHALLOSAN® έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη αιμάτωση του πέους, καθώς ασκείται σ' αυτό πίεση. Πολλοί χρήστες του PHALLOSAN® χρησιμοποιούν το προϊόν, καθώς μεγαλώνουν, ως αντιγηραντική θεραπεία, καθώς η διαδικασία έχει περιγραφή ως "Bodybuilding πέους".

#### **Υποστήριξη μετά από ορμονική θεραπεία σε περίπτωση καρκίνου του προστάτη**

Κατά τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη η

αφαίρεση ορμονών έχει μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα την ελάττωση του μεγέθους του πέους. Η ελάττωση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα με τη χορήγηση Viagra ή με χορήγηση ουσιών σε ενέσιμη μορφή (SKAT) που διαστέλλονται. Επίσης, σε περίπτωση αφαίρεσης του προστάτη, οι συχνά εμφανιζόμενες διαταραχές στη στύση συνοδεύονται από ελάττωση του μεγέθους του πέους. Για το λόγο αυτό κάποιοι ουρολόγοι χορηγούν προληπτικά Viagra ή ακολουθούν μια θεραπεία κατά την οποία χορηγούν στους ασθενείς τους ουσίες σε ενέσιμη μορφή που διαστέλλονται (SKAT). Το PHALLOSAN® βοηθάει τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη να αντιμετωπίσουν με επιτυχία μια μετεγχειρητική ελάττωση του μεγέθους του πέους τους χωρίς να ξοδεύουν πολλά χρήματα.

#### **Κύρτωση πέους (Απόκλιση του πέους)**

Η κύρτωση του πέους είναι η κάμψη ή η κλίση του προς μία πλευρά. Ανάλογα με το βαθμό της κλίσης, η κύρτωση του πέους μπορεί να ενοχλεί κάποιους άντρες για καθαρά αισθητικούς λόγους ή και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, προκαλώντας πόνο ή και καθιστώντας την εντελώς αδύνατη. Η κύρτωση αυτή μπορεί να υπάρχει εκ γενετής. Μπορεί όμως και να εμφανιστεί αργότερα, μετά από τραυματισμό του πέους ή των σωλήνων που χρησιμοποιούνται για την ούρηση. Τέτοιου είδους περιπτώσεις μέχρι σύμμιξης αντιμετωπίζονται μόνο με εγχείρηση, γεγονός που είχε όμως ως συνέπεια την ελάττωση του μεγέθους του πέους κατά 3-5

εκατοστά. Στην εγχείρηση η κλίση διορθώνεται είτε μέσω ραφής του μακρύτερου μέρους, είτε μέσω αφαίρεσης ιστού από τη μακρύτερη πλευρά, ο οποίος στη συνέχεια προστίθεται εγχειρητικά στην άλλη πλευρά με αποτέλεσμα την ευθυγράμμιση του πέους. Το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης αυτής δεν είναι πολύ ευχάριστο.

#### **Τοπική σκλήρυνση του πέους με επίπονη κύρτωση (Induration Penis Plastics (IPP)**

Αυτή η πάθηση έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται σε μικρότερα ή μεγαλύτερα σημεία σπογγώδης ιστός εξαιτίας της υπερβολικής παραγωγής ινών. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα επιστημονικά η αιτία για την εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών. Κάποιες συγκεκριμένες ομάδες έχουν αποδεχθεί ιδιαίτερος ευπαθείς, όπως για παράδειγμα οι διαβητικοί. Οι σκληρύνσεις αυτές οδηγούν σε επίπονη παραμόρφωση του ανδρικού μορίου, γεγονός που καθιστά επίπονη ή και αδύνατη τη σεξουαλική επαφή. Οι συντηρητικές επεμβάσεις υπό τη μορφή χορήγησης φαρμάκων, ακτίνων X, ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ή ιοντοφόρησης, είτε δεν έχουν αποτελέσματα είτε κάποιες φορές επιτυγχάνουν απλώς την πρόσκαιρη ανακούφιση από τον πόνο. Τελικώς, η μόνη λύση παραμένει η εγχειρητική αφαίρεση των σημείων αυτών και η χρησιμοποίηση τεχνητού δέρματος ή δέρματος από κάποιο άλλο μέρος του σώματος του ασθενούς στα συγκεκριμένα σημεία. Σε κάθε περίπτωση στο άμεσο μέλλον αυτή θα παραμείνει η μόνη λύση για προχωρημένες

περιπτώσεις. Σε κάποιους ασθενείς, όμως, αυτή η επέμβαση, ανάλογα με το μέγεθος του σημείου που αφαιρέθηκε, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της στύσης ή την πλήρη απώλεια αυτής, γεγονός που καθιστά τελικώς αναγκαία την εμφύτευση ενός τεχνητού τμήματος πέους. Οι σκληρύνσεις αυτές δεν μπορούν φυσικά να αντιμετωπιστούν με τη χρήση του PHALLOSAN®, αυτό δεν είναι όμως εφικτό ούτε και με εγχείρηση. Το PHALLOSAN® μπορεί όμως να διορθώσει ξανά την κλίση του πέους, καθώς ο σπογγώδης ιστός με τη συνεχή άσκηση δύναμης οδηγείται στη δημιουργία νέων ινών. Το πέος γίνεται ίσιο με τη χρήση του PHALLOSAN®, και η γωνία προς την οποία είναι η κλίση δεν έχει σημασία. Η μεγαλύτερη δύναμη ασκείται στην μεριά που έχει κλίση, κι έτσι στο σημείο αυτό δημιουργούνται μικρές ανώδυνες ριζες ιστών, γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία νέων κυττάρων. Σε μία περίπτωση την οποία μελέτησε ο καθηγητής Δρ. Jehle, ο ασθενής είχε κλίση του πέους 90 μοιρών. Μετά από 9 μήνες η κλίση αυτή είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Ο ασθενής ανέφερε ότι μετά από 12 εβδομάδες ήταν και πάλι σε θέση να έρθει σε σεξουαλική επαφή. Η επιτυχία της θεραπείας με PHALLOSAN® διαρκεί μέχρι σήμερα, 6 χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας. Η θεραπεία με τη χρήση του PHALLOSAN® συνιστάται σε κάθε περίπτωση ως εναλλακτική προσπάθεια πριν τη λύση της εγχείρησης, κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη ότι δεν λειτουργεί εις βάρος κάποιας άλλης μορφής θεραπείας. Οι κλινικές αποδείξεις για τη μεγένθυση του πέους μετά από την

επιτυχημένη αντιμετώπιση της κύρτωσης αναφέρθηκαν ήδη στην περίπτωση του παραπάνω ασθενούς. Ευχαρίστως να σας αποστείλουμε την ιατρική έκθεση σε περίπτωση που το επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να την διαβάσετε στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση [www.phallosan.gr](http://www.phallosan.gr) - χρήση – εστιακή σκλήρυνση στο πέος – κλινικές αποδείξεις: επιτυχημένη αντιμετώπιση της κύρτωσης του πέους ενός ασθενούς.



#### Προετοιμασία:


Ανοίξετε μπροστά σας το PHALLOSAN® και τοποθετήστε την αγκράφα της ζώνης (2) στο μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος. Περάστε τη ζώνη γύρω από τη μέση σας έτσι ώστε το δαχτυλίδι από σιλικόνη (1) και ο μεταλλικός συνδετήρας (4) να εφάπτονται χαλαρά κάτω από την κοιλιά σας. Στη συνέχεια βγάλτε ξανά τη ζώνη. Μην ανοίξετε ακόμα τα κλειστά προφυλακτικά! Ακολουθήστε με ακρίβεια αυτές τις οδηγίες. Μόνο ελαστικά προφυλακτικά τα οποία δεν έχουν ανοιχτεί μπορούν να αντικατασταθούν δωρεάν με αυτά στο μέγεθός σας, σε περίπτωση που μας αποστείλετε αυτά που δεν έχουν το σωστό μέγεθος. Τα έξοδα αποστολής βαραινούν τον αποστολέα. Προφυλακτικά τα οποία έχουν ανοιχτεί δεν μπορούν να πωληθούν, κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή σ' αυτήν την περίπτωση η αντικατάστασή τους. Συνιστάται η αφαίρεση της τριχοφυΐας στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, για να αποφευχθούν πιθανοί ερεθι-

σμοί κατά την αφαίρεση του ελαστικού προφυλακτικού. Κατάλληλες είναι οι αποτριχωτικές κρέμες, τι οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε στα φαρμακεία.






**1. Βρείτε με το πατρόν που συμπεριλαμβάνεται το κατάλληλο για εσάς μέγεθος προφυλακτικού.** Μετρήστε από τη βάση του πέους μέχρι τη βάλανο, όταν το πέος δεν βρίσκεται σε στύση.

**2. Συνιστάται να πλένετε το προστατευτικό κάλυμμα πριν την πρώτη χρήση, για να απομακρυνθούν πιθανά υπολείμματα πούδρας, η οποία χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή του προϊόντος με στόχο να αποφευχθεί η πιθανότητα να κολλήσουν τα διάφορα μέρη μεταξύ τους.**

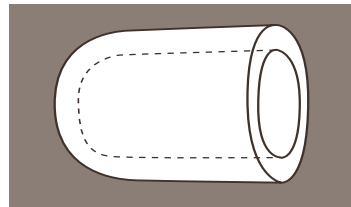


**3. Αρχικά καλύψτε το πέος με το προστατευτικό κάλυμμα, όπως φαίνεται στις εικόνες. Δεν έχει σημασία εάν το δέρμα που καλύπτεται τη βάλανο παραμείνει πάνω σε αυτήν ή εάν το τραβήξετε προς τα πίσω πριν την τοποθέτηση.**

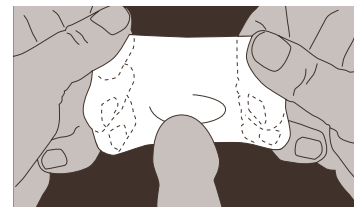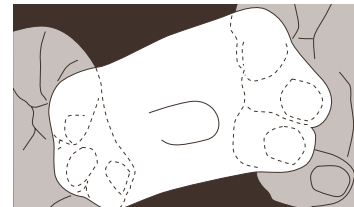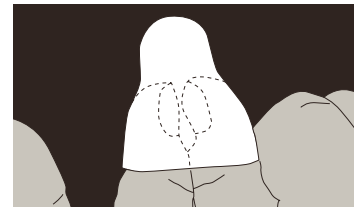


**4. Προσέξτε να μην υπάρχει αέρας στην κορυφή της βάλανου. Το προστατευτικό κάλυμμα**

έχει ως στόχο την προστασία του πέους από τις παρενέργειες μιας πιθανώς υπερβολικής δύναμης που θα ασκηθεί σε αυτό. Η υφή του είναι μαλακή και φιλική προς το δέρμα. Βγάλτε το προφυλακτικό με το σωστό μέγεθος από τη συσκευασία. Τα άλλα δύο κλειστά ελαστικά προφυλακτικά μπορείτε να τα στείλετε πίσω και θα σας αποστείλουμε άλλα δύο που να ανταποκρίνονται στο μέγεθός σας. Είμαστε σε θέση να φτιάξουμε και ενδιάμεσα μεγέθη, για παράδειγμα ένα προφυλακτικό μεγέθους μεταξύ large και medium. **Μη χρησιμοποιείτε αλοιφές και κρέμες, καθώς επηρεάζουν την εφαρμογή και τη διάρκεια ζωής του ελαστικού προφυλακτικού καλύμματος.**

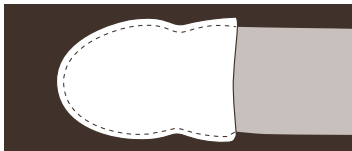

5. Θα θέλαμε τώρα να σας επιστήσουμε την προσοχή στις τεχνικές ιδιαιτερότητες της χρήσης του ελαστικού προφυλακτικού. Παρακαλείσθε να έχετε κατα νου ότι με μια απλοποιημένη περιγραφή προέκειται για μια βεντούζα με καπάκι. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικός ο βαθμός στον οποίο το προφυλακτικό καλύπτει το πέος. Το προφυλακτικό δεν είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει τη δύναμη πάνω στο πέος. Η δύναμη μεταφέρεται μόνο μέσω του κενού αέρος που δημιουργείται μέσα στη βεντούζα. Το προφυλακτικό είναι απλώς ένα

διαχωριστικό μεταξύ της βεντούζας και της βάσης του πέους. Ενώστε τη φούσκα με το ελαστικό προφυλακτικό. Κρατήστε έπειτα το έτοιμο ελαστικό προφυλακτικό στο χέρι σας. Προσέξτε ιδιαίτερα η βάλανος να μπει μόνο μέχρι τη μέση περίπου κατά την τοποθέτησή της μέσα στη βεντούζα. Τώρα μόνο ξετυλίξτε το κάλυμμα πάνω στο πέος σας. Κατόπιν τραβήξτε τη βάλανο με τη βοήθεια της φούσκας μέχρι να μπει ολόκληρη μέσα μέσα στη βαντούζα. Το διαχωριστικό προφυλακτικό θα μπει και αυτό λίγο μέσα στη βεντούζα.


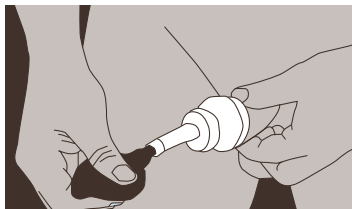


6. Το πέος τώρα έχει μπει ολόκληρο μέσα στη βεντούζα. Τραβήξτε την άκρη του προφυλακτικού πάνω από τη βάση του πέους, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιείτε τη φούσκα της βεντούζας.




Σε περίπτωση που το προφυλακτικό είναι χαλαρό στη βάση του πέους τοποθετήστε τη μανσέτα με την μαλακή πλευρά της προς τα μέσα στο προφυλακτικό, χωρίς να πιέσετε κατά τη διαδικασία αυτή το πέος. Η μανσέτα έχει ως στόχο μόνο να αποφευχθούν οι ζάρες που μπορεί να δημιουργηθούν. Σε περίπτωση που το προφυλακτικό εφαρμόζει καλά στη βάση του πέους, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τη μανσέτα.


7. Αφήστε τη φούσκα, η οποία είναι έχει πλέον βαθούλωμα δίπλα στο προφυλακτικό, ενώ φοράτε τη ζώνη. Θα στερεώσει το προφυλακτικό στο πέος.

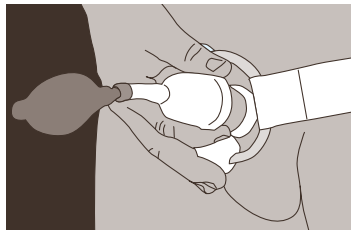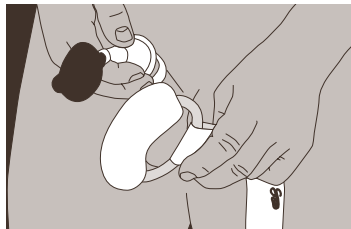


8. Ανοίξτε το μεταλλικό συνδετήρα στην άλλη πλευρά της ζώνης. Ρυθμίστε τη ζώνη στο μεγαλύτερο δυνατό άνοιγμα. Πιέστε τώρα τη λαστιχένια άκρη του προφυλακτικού σαν να ήταν μπαλόνι, για να μην μπει αέρας, αφαιρέστε τη φούσκα και ενώστε το ελαστικό προφυλακτικό με τον συνδετήρα. Προσέξτε ώστε η λαστιχένια άκρη του ελαστικού προφυλακτικού να στερεώνεται στο κέντρο του συνδετήρα.

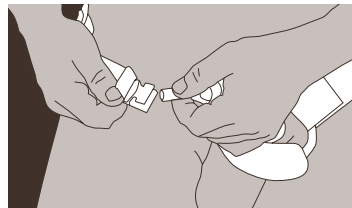

9. Μικρώνετε την ελαστική ζώνη και προσέξτε ώστε να περνάει από τη βουβωνική χώρα. Τραβήξτε τη ζώνη από πίσω στα οπίσθια προς τη μέση σας. Αν στερεώνεται στα οπίσθια υπάρχει η περίπτωση όταν κάθεστε να αυξάνεται η πίεση που ασκείται, πράγμα που μπορεί να είναι δυσάρεστο.

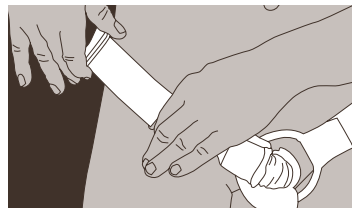

Οι γάντζοι λειτουργούν ως ασφάλεια έτσι ώστε τα δύο άκρα της ζώνης να ενώνονται χαλαρά και σε περίπτωση που το κλιπ γλιστρήσει και φύγει να μην τραβηχτεί προς τα πίσω η ζώνη.



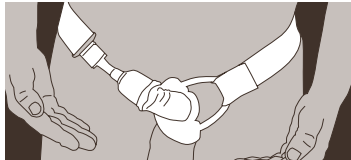


#### **Φροντίδα:**

**Το προφυλακτικό δεν πρέπει να βγαίνει από τη βεντούζα** και για λόγους υγιεινής θα πρέπει να πλένεται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι στο χέρι. Κατά το πλύσιμο απομακρύνετε το πράσινο απορροφητικό υλικό και καθαρίστε το ξεχωριστά. Παρακαλείσθε να μην ξεχνάτε ποτέ να περνάτε το στεγνό προφυλακτικό μετά τη χρήση, αφού το ξετυλίξετε, με ταλκ, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα με αθλητικά είδη. Μη χρησιμοποιείτε ταλκ για μωρά, καθώς αυτό εμπεριέχει λιπαρή ανιλίνη. Διατηρήστε το προφυλακτικό ξετυλιγμένο, μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Μόνο τότε ξανατυλίγετε το προφυλακτικό. Αποφεύγετε έτσι την πιθανότητα να χαλαρώσει ή να κολλήσει το προφυλακτικό.

#### **Έτσι ξανατυλίγετε άνετα το κάλυμμα:**

Αλείψετε εξωτερικά το ξετυλιγμένο προφυλακτικό με μη λιπαρή πούδρα (ταλκ) και στερεώνετε τη λαστιχένια άκρη ανάμεσα στα γόνατά σας. Έτσι έχετε και τα δύο σας χέρια ελεύθερα.

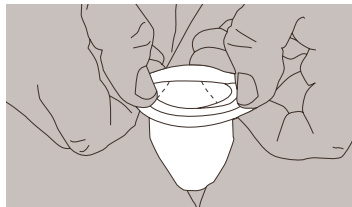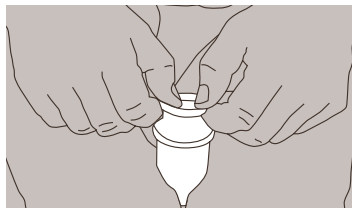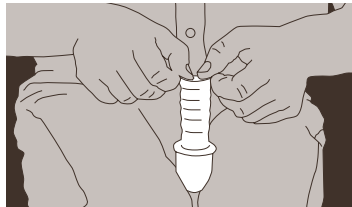

Το τυλίγετε προσεκτικά πίσω από την εσωτερική άκρη της βεντούζας. Παρακαλείσθε να είσθε πολύ προσεκτικοί και να μη φθείρετε το κάλυμμα με τα νύχια σας ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

#### **Βήματα για να ρυθμίσετε την πίεση που ακεί η ζώνη στο πέος.**

##### **Εισαγωγή:**

Ο ιστός του δέρματος του ανθρώπινου σώματος ρυθμίζεται από την εκάστοτε κληρονομικότητα, και για το λόγο αυτό διαφέρει σε καθέναν όσον αφορά την αντοχή του. Για το λόγο αυτό θα ήταν από ιατρικής πλευράς ανεύθυνη η ρύθμιση της δύναμης που θα ασκείται με βάση το βάρος. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα σχέδιο με συγκεκριμένα βήματα, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε ακριβώς τη δύναμη που ασκεί η ζώνη στον ιστό του δέρματός σας. Έτσι επιτυγχάνετε το ιδανικό αποτέλεσμα της μεγέθυνσης του πέους σε μήκος και πάχος χωρίς οποιαδήποτε αρνητική παρενέργεια.

##### **Πρώτη ημέρα:**

Ρυθμίστε τη ζώνη ανάλογα με την αίσθησή σας χωρίς να ασκείται υπερβολική δύναμη και χρησιμοποιήστε τη μόνο για μία ώρα. Ανοίξτε τη ζώνη και βγάλτε το προφυλακτικό. Παρατηρήστε τώρα το σημείο εκείνο στο πέος που βρίσκεται μεταξύ της ουρήθρας και του χαλινού της πόσθης στο κάτω μέρος της βάλανου. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο ο ιστός του δέρματος στο πέος είναι πιο ευαίσθητος! Εάν το σημείο αυτό έχει κοκκινίσει ή πρηστεί, η δύναμη που ασκήθηκε από τη ζώνη στο πέος ήταν υπερβολική. Μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν άλλο εκείνη την ημέρα. Εάν δεν παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στο χρώμα, σημειώστε το σημείο εκείνο

στη λουρίδα της ζώνης. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως μην χρησιμοποιήσετε άλλο το προϊόν εκείνη την ημέρα.

##### **Δεύτερη μέρα:**

Ασθενείς στους οποίους είχε εμφανιστεί κοκκίνισμα την προηγούμενη ημέρα: σε περίπτωση που το εν λόγω σημείο είχε κοκκινίσει την προηγούμενη ημέρα ή είχε πρηστεί, χρησιμοποιήστε ξανά το προϊόν, ασκώντας όμως αυτή τη φορά μικρότερη δύναμη. Μετά από μία ώρα παρατηρήστε το σημείο εκείνο στο πέος που βρίσκεται ανάμεσα στην ουρήθρα και τον χαλινό της πόσθης. Εάν αυτό το σημείο έχει κοκκινίσει ή πρηστεί, η δύναμη που ασκήθηκε ήταν και πάλι υπερβολικά μεγάλη. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο το προϊόν εκείνη τη μέρα. Ασθενείς στους οποίους δεν παρουσιάστηκε κοκκίνισμα ή πρήξιμο την προηγούμενη ημέρα: Αυξήστε το χρόνο χρήσης της ζώνης στις δύο ώρες και παρατηρήστε ξανά το εν λόγω σημείο. Εάν δεν υπάρχει κοκκίνισμα ή πρήξιμο αυξήστε τη χρήση την επόμενη ημέρα κατά μία ακόμα ώρα.

##### **Από την τρίτη μέχρι την όγδοη ημέρα:**

Ασθενείς με ή χωρίς κοκκίνισμα ή πρήξιμο από την πρώτη μέρα: εάν τη δεύτερη μέρα φορέσατε τη ζώνη χωρίς αλλαγή του χρώματος ή πρήξιμο στο εν λόγω σημείο, την τρίτη ημέρα χρησιμοποιήστε τη ζώνη για 3 ώρες. Εάν μετά από 3 ώρες εμφανιστεί κοκκίνισμα ή πρήξιμο ελαττώστε τη δύναμη που ασκείται και χρησιμοποιήστε το προϊόν για τον ίδιο χρόνο την επόμενη μέρα. Εάν δεν παρουσιάστηκαν ερεθισμοί ή

πρήξιμο, φορέστε τη ζώνη την επόμενη μέρα για μία ώρα παραπάνω.

Εάν τις απόμενες ημέρες εμφανιστεί κοκκίνισμα ή πρήξιμο στο σημείο μεταξύ της ουρήθρας και του χαλινού της πόσσης στο κάτω μέρος της βάλανου, ελαπώστε τη δύναμη που ασκείται στο πέος, σημειώστε το σημείο αυτό με ένα στυλό στη λουριδα της ζώνης και φορέστε τη ζώνη την επόμενη ημέρα ασκώντας μικρότερη δύναμη. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πράσινο σπογγώδες προστατευτικό υλικό να ακουμπάει στη βάλανο. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα. Θα χρησιμοποιήσετε το PHALLOSAN® γεμάτοι ενθουσιασμό και σε λίγους μήνες το πέος σας θα μεγαλώσει σε μήκος και πάχος. Θα δείτε μόνο θετικά αποτελέσματα, όπως μεγαλύτερη σεξουαλική διάθεση και ευχαρίστηση, χωρίς όμως πρόωρη εκσπερμάτωση. Η αιτία: Το πέος κατά τη διάρκεια της χρήσης του PHALLOSAN® αποκτά καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Αυτό επιδρά θετικά σε όλο τον ιστό και τις απολήξεις των νεύρων. Καλή επιτυχία!

### Διάρκεια χρήσης

Το PHALLOSAN® θα πρέπει να φοριέται 8-10 ώρες την ημέρα, κατά διαστήματα και περισσότερο! Παρακαλείσθε να μην ξεχνάτε κάθε 3 με 4 ώρες να κάνετε ένα διάλειμμα περίπου 5 λεπτών, να βγάζετε το ελαστικό κάλυμμα και να κάνετε μαλάξεις στο πέος για περίπου ένα λεπτό. Μετά από 8 περίπου μέρες αυτό δεν είναι πλέον αναγκαίο. Αυτά τα ενδιάμεσα διαλείμματα δε βλάπτουν, αλλά ενισχύουν το ιστο-

μετρικό αποτέλεσμα. Όσο μεγαλύτερη χρήση κάνετε καθημερινά, τόσο γρηγορότερη θα είναι η επιτυχία! Πολλοί χρήστες του προϊόντος φορούν το PHALLOSAN® μέχρι και 12 ώρες ημερησίως με την αντίστοιχη επιτυχία. Το ελαστικό προφυλακτικό θα πρέπει να πλένεται καθημερινά με σαπούνι στο χέρι σε ζεστό νερό για λόγους υγιεινής (πιθανότητα βακτηριαδικής μόλυνσης).

Το PHALLOSAN® μπορεί να χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς σε περίπτωση νυχτερινής σύσης το ελαστικό προφυλακτικό τεντώνεται.

### Παρενέργειες, Ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας

Η χρήση του PHALLOSAN® γίνεται με προσωπική ευθύνη, εάν όμως τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας δεν προκύπτουν κίνδυνοι. Παρόλα αυτά δε θα πρέπει κιόλας από τις πρώτες βδομάδες χρήσης να ασκείται στο πέος μεγάλη πίεση.

Συνηθίστε στη χρήση του PHALLOSAN®, και εφαρμόστε τη ζώνη (3) αρχικά σε χαλαρή πίεση. Ελέγχετε αρχικά ανά μία ώρα το πέος σας για αλλαγή χρώματος (δείγμα διαταράξεις στην κυκλοφορία του αίματος) και πρήξιμο. Εάν επέλθουν αλλαγές στο χρώμα, πόνος ή πρήξιμο, ιδίως στην περιοχή κοντά στην ουρήθρα, ανοίξτε αμέσως τη ζώνη (3) και εξετάστε το πέος σας για τυχόν διαταράξεις στην κυκλοφορία του αίματος και πρηξίματα.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρήξιμο και/ή φουσκάλες στο δέρμα ή στη βάλανο, η ζώνη (3) είχε τοποθετηθεί πολύ σφιχτά. Κάντε οπωσδή-

ποτε ένα διάλειμμα μέχρι να εξαφανιστεί το πρήξιμο και οι φουσκάλες. Ρυθμίστε την πίεση έπειτα λίγο πιο χαλαρά. Έχετε υπομονή, η διαδικασία επιμύκνωσης πέους επιτυγχάνεται όπως οι επεμβάσεις στη γνάθο. Η διάρκεια της πίεσης, και όχι μόνο η ένταση εγγυάται την επιτυχία! Stärke ist der Garant des Erfolgs!

### Στις παρακάτω επίσης περιπτώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το PHALLOSAN®:

ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ, ύστερα από χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ιατρικών παυσίπονων, υπνωτικών και ηρεμιστικών χαπιών, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε τον φυσικό πόνο. Αποφύγετε τη χρήση του PHALLOSAN® πάνω σε ερεθισμούς ή ανοιχτές πληγές πάνω στο πέος σας, αλλά και σε περίπτωση που τα αγγεία ή ο ιστός του δέρματός σας είναι πολύ ευαίσθητα.

### Πώς μετρώ ακριβώς την αύξηση του μήκους του πέους μου;

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα μέτρο. Κρατήστε το πέος σας όχι εν σύση σε ορθή γωνία προς τον κορμό σας (90 μοίρες). Τοποθετήστε το μέτρο παράλληλα στο πέος σας αρχίζοντας το μέτρηση από πάνω. Φτάστε με το μέτρο μέχρι το ισχίο. Έτσι υπολογίζετε το μήκος του πέους σας. Την ίδια διαδικασία μέτρησης ακολουθήστε και με το πέος σας εν σύση.

**Προσοχή:** Μετρήστε στην αρχή της χρήσης το ακριβές σας σωματικό βάρος χωρίς ρούχα. Σε

μία πιθανή αύξηση βάρους σχηματίζεται ιδιαιτέρως στην ηβική περιοχή γύρω από το πέος στρώμα λίπους. Αυτό μικραίνει την απόσταση από την κορυφή του πέους ως την ηβική χώρα και οδηγεί σε λάθος αποτέλεσμα. Οι γιατροί το ορίζουν ως κρεμώμενο λίπος.

Όλα τα εξαρτήματα του PHALLOSAN® μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά. Σε περίπτωση άλλων ερωτήσεων ή παρατηρήσεων οι ειδικοί μας βρίσκονται συνεχώς στα τηλεφωνικά μας κέντρα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τεχνικές αλλαγές δημοσιοποιούνται και στο δίκτυο στις διευθύνσεις: [www.phallosan.gr](http://www.phallosan.gr)

### Ο αντιπρόσωπος μας σε Γερμανία,

HGB AG  
Am Wallgraben 18  
DE-82541 Münsing  
Germany

Τηλ: +49 81 77 93 16 10  
Fax: +49 81 77 93 16 20

mailto:info@hgbag.com  
Phalomed, 11.2009

## Επωφεληθείτε από τη διαφήμιση του PHALLOSAN® σε φίλους σας

Αξίζει η σύσταση του PHALLOSAN® σε άλλους. Για κάθε νέο πελάτη, ο οποίος, έπειτα από τη δικιά σας σύσταση ως ήδη εγγεγραμμένου πελάτη μας, θελήσει γραπτά ή τηλεφωνικά να αποκτήσει το PHALLOSAN®, κι έτσι αποκτήσει κατά την εγγραφή του τον προσωπικό του αριθμό, σας ευχαριστούμε με ένα κουπόνι αξίας 43 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ενός ελαστικού προφυλακτικού στο μέγεθος της επιλογής σας.

Ήμουν πελάτης του PHALLOSAN® και έπεισα έναν νέο πελάτη για τα προτερήματα του PHALLOSAN®

Αριθμός παραγγελίας \_\_\_\_\_

Όνομα \_\_\_\_\_

Οδός, αριθμός \_\_\_\_\_

T.K., πόλη \_\_\_\_\_

Ο πελάτης που ενέγραψα:

\_\_\_\_\_

\*Προϋποθέσεις συμμετοχής: Το συμβόλαιο του αιτούντα νέου πελάτη πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετείται χρονικά μετά το συμβόλαιο του 'διαφημιστή' πελάτη στην HGB AG, Phalomed Ltd. Η ισχύουσα περίοδος ξεκινάει την 1. Νοέμβρη 2009 και τελειώνει στις 31.12.2010. (Τέλος της προσφοράς) Επαγγελματίες πελάτες αποκλείονται από τη συμμετοχή. Η αποστολή του κουπονιού στον αιτούντα πελάτη πραγματοποιείται μετά το πέρας της νόμιμης προθεσμίας επιστροφής του νέου πελάτη. Δεν είναι δυνατή η πληρωμή τοις μετρητοίς.

Όνομα \_\_\_\_\_

Αριθμός παραγγελίας \_\_\_\_\_

Παραγγέλνω το ελαστικό προφυλακτικό αξίας 38 ευρώ μεγέθους:

**S** = βεντούζα S με προφυλακτικό S

**MS** = βεντούζα M με προφυλακτικό S

**M** = βεντούζα M με προφυλακτικό M

**LM** = βεντούζα L με προφυλακτικό M

**L** = βεντούζα L με προφυλακτικό L

**XL** = βεντούζα XL με προφυλακτικό XL

**Παρακαλώ συμπληρώστε και αποστείλατε στη διεύθυνση:**

**HGB  
Marketing – Product Management  
Am Wallgraben 18  
DE-82541 Münsing  
Deutschland**

**Αποστολή μέχρι τις 31.12.2010**